

Multicath 7 Safe von Vygon

**Venenkatheter aus Polyurethan
mit Sicherheitskanüle gemäß
TRBA 250**



Anzahl pro VE

10 Stück

Siebenlumiger, zentralvenöser Katheter nach Seldinger für die komplexe Infusionstherapie bei polytraumatisierten Patienten mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe zum Schutz der Anwender vor Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken


Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
3,9	11,5	16	170.170	04120505
3,9	11,5	20	170.270	04120511
3,9	11,5	30	170.370	04120528

Multicath 7 Safe

Einzigartigkeit und Vielseitigkeit in Funktion und Design!

Die **Zahl 7** fasziniert Menschen seit Urzeiten. Sie gilt als magische Zahl der Vollkommenheit. Die Zahl 7 hat uns dazu inspiriert die Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen noch sicherer zu machen.

Das Ergebnis unserer Bemühungen: multicath7safe® - Das Vygon-Premiumprodukt für die komplexe Infusionstherapie **bei polytraumatisierten Patienten**.

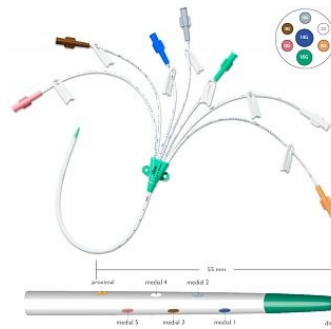


Alle **7 Lumen** des Katheters treten in einem Bereich von 55 mm - gemessen von der flexiblen Katheterspitze - aus dem Katheter aus. Das Risiko von Medikamenteninkompatibilitäten und Paravasation wird auf ein Minimum reduziert!


Katheterset nach Seldinger mit **Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®** und **Safety-Skalpell** zum Schutz vor Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.

- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter
- aus thermosensiblen PUR
- die flexible Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, echogenen Eigenschaften
- **knickstabiler Sicherheits-Guide aus Nitinol** und **EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

Katheter-Set:

- **7-lumiger Katheter** aus Polyurethan
Fixierflügel, klemmbar
- Universalverschlussstopfen
- Spritze, 5 ml
- **Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®** mit optimierten **echogenen Eigenschaften**
- knickstabiler Sicherheits-J-Guide aus Nitinol mit zusätzlicher **EKGMarkierung** und Einhand-Einführhilfe
- **Safety-Skalpell**
- 2 Dilatatoren

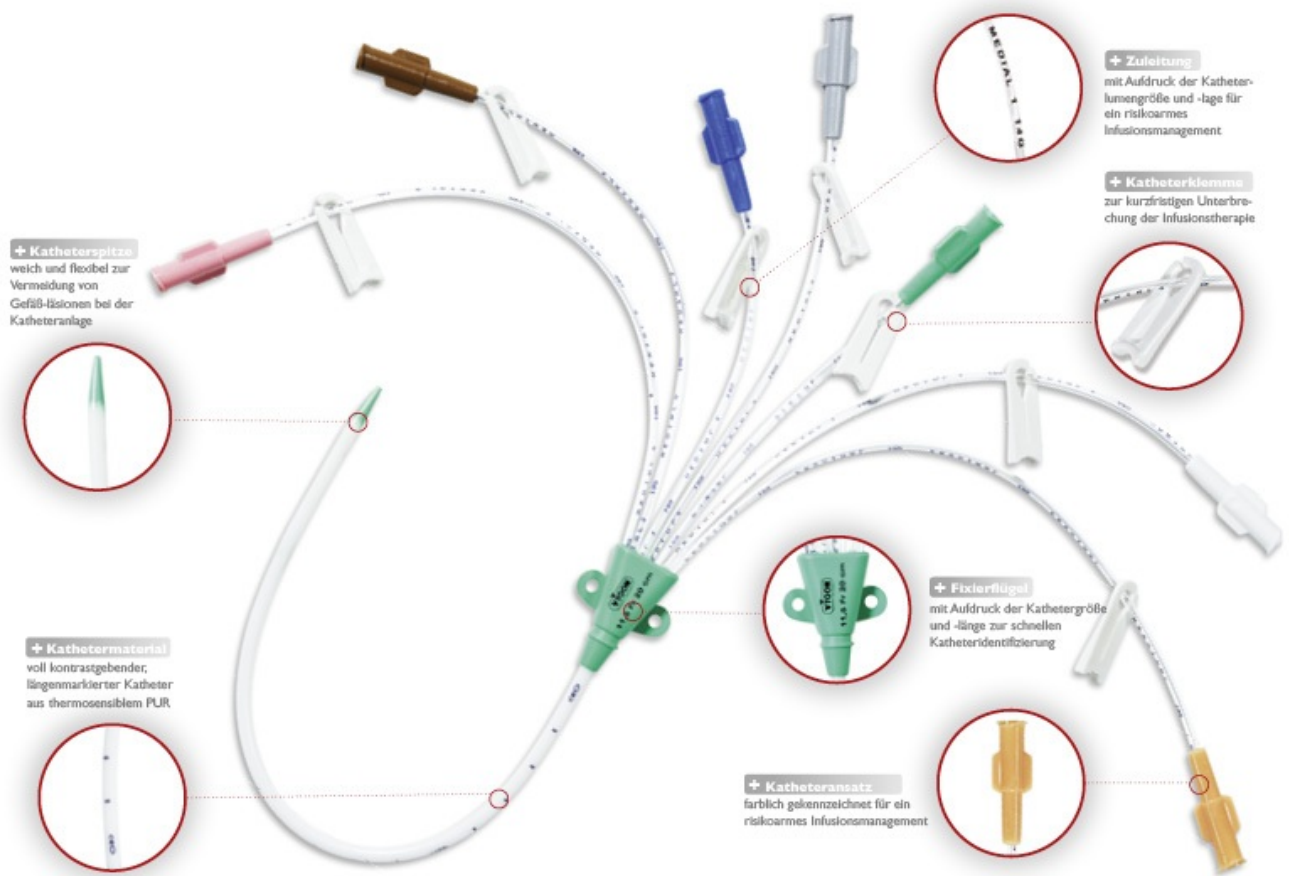

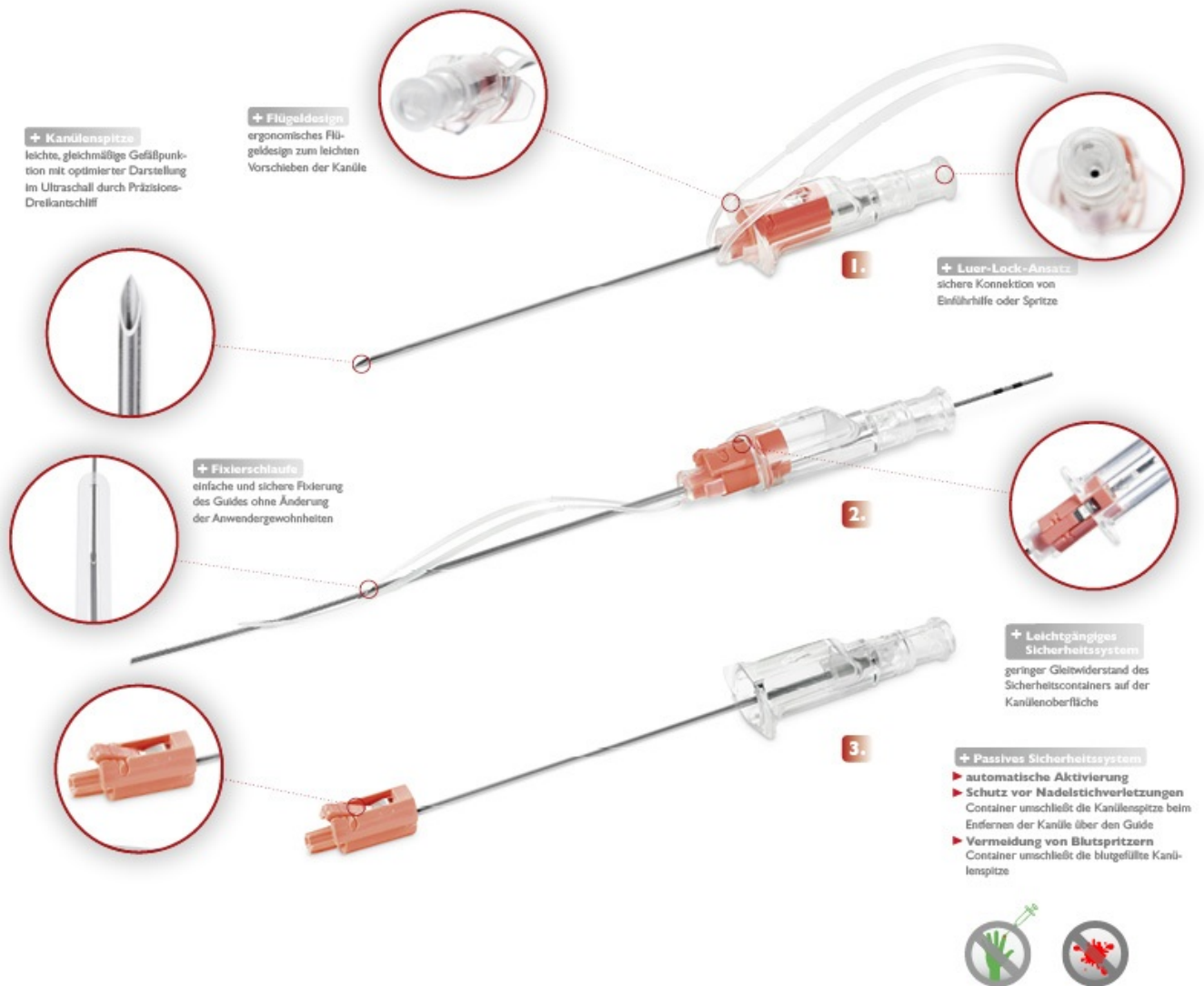

Spezifikationen

Katheter			Lumen G							Guide		SeldiSafe			Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	Lcm	Totr.-Vol. ml							Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
			Durchfl. ml/min													
			Dist.	Med.1	Med.2	Med.3	Med.4	Med.5	Prox.							
3,9	11,5	16	16	14	18	18	18	18	18	0,88	60	1,26	18	70	170.170	10
			0,61	0,62	0,43	0,50	0,50	0,50	0,52							
3,9	11,5	20	60	110	15	15	18	18	18	0,88	60	1,26	18	70	170.270	10
			0,61	0,62	0,49	0,50	0,50	0,50	0,56							
3,9	11,5	30	16	14	18	18	18	18	18	0,88	70	1,26	18	70	170.370	10
			0,64	0,80	0,52	0,56	0,60	0,61	0,61							
			38	77	8	8	8	10	10							