

Multistar 3+ Safe von Vygon

Antimikrobieller Venenkatheter aus Polyurethan mit Sicherheitskanüle und Bloodless-System



Anzahl pro VE

5 Stück

Dreilumiger zentralvenöser Antibiotika- und Antimykotika- inkorporierter Katheter nach Seldinger mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250. Aufgrund seiner speziellen Wirkstoffkombination eignet sich dieser antimikrobielle Katheter für die Intensivstation bei Patienten mit stark eingeschränkter Immunabwehr.


| Katheter Ømm | Katheter Fr | Katheter Lcm | Art.-Nr. | PZN |
|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| 2,7 | 7,5 | 20 | 6155.270 | 10304089 |
| 2,7 | 7,5 | 30 | 6155.370 | 10304095 |

Multistar 3+ Safe

Rundum Sicher!

Dreilumiger zentralvenöser **Antibiotika- und Antimykotika-inkorporierter** Katheter nach Seldinger mit Sicherheits-punktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250 für **mehr Patienten- und Anwendersicherheit** vor Nadelstich-verletzungen und den damit Verbundenen Infektionsrisiken.

Aufgrund **seiner speziellen Wirkstoffkombination** eignet sich dieser antimikrobielle Katheter auf der Intensivstation für Hochrisikopatienten mit **stark eingeschränkter Immunabwehr** zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie

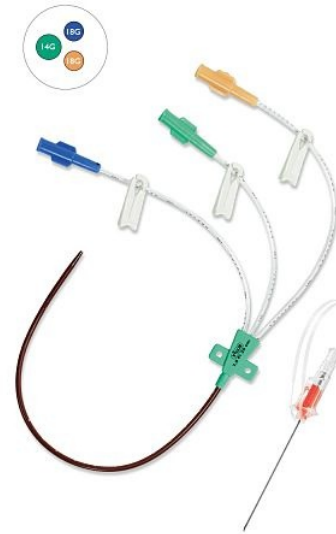


Alle Komponenten des Kathetersets sind so ausgelegt worden, dass die Gefahr von **Stichverletzungen** und den damit verbundenen Infektionsrisiken **auf ein Minimum reduziert wird**.

- Antibiotika- und Antimykotikainkorporierter Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** und **Blood-Less-System (BLS)** für eine blutarme Gefäßpunktion
- **Knickstabiler, teflonbeschichteter Sicherheits-J-Guide aus Nitinol** mit **EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- die flexible abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

Katheter-Set:

- **Antibiotika- und Antimykotikainkorporierter** Katheter
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** und **Blood-Less-System (BLS)** für eine blutarme Gefäßpunktion
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit zusätzlicher **EKG-Markierung** und Einhand-Einführhilfe
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- Dilatator

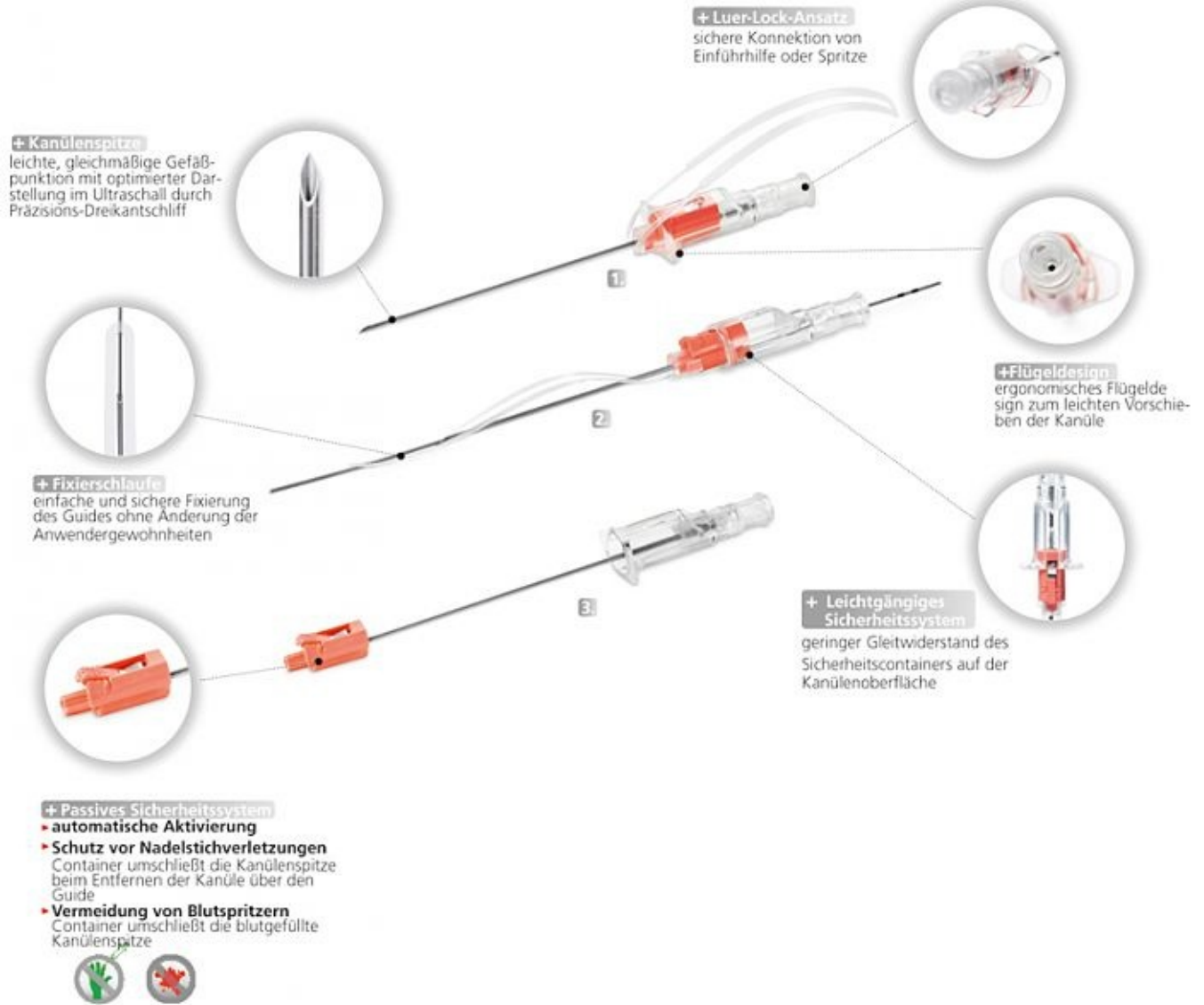

Spezifikationen

| Katheter | | | Lumen G | | | Guide | | SeldiSafe | | | Art.-Nr. | VE |
|----------|-----|-----|---------------|-----------------|-------|-------|-----|-----------|----|-----|----------|----|
| Ømm | Fr | Lcm | Totr.-Vol. ml | Durchfl. ml/min | Prox. | Ømm | Lcm | Ømm | G | Lmm | | |
| | | | Dist. | Med. | | | | | | | | |
| 2,7 | 7,5 | 20 | 14 | 18 | 18 | 0,88 | 60 | 1,26 | 18 | 70 | 6155.270 | 5 |
| | | | 0,45 | 0,34 | 0,36 | | | | | | | |
| 2,7 | 7,5 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0,88 | 70 | 1,26 | 18 | 70 | 6155.370 | 5 |
| | | | 14 | 18 | 18 | | | | | | | |
| | | | 0,49 | 0,40 | 0,50 | | | | | | | |
| | | | 50 | 18 | 20 | | | | | | | |