

Multicath 4 Expert Safe von Vygon

Antimikrobieller Venenkatheter aus Polyurethan mit Sicherheitskanüle



Anzahl pro VE

5 Stück

Vierlumiger zentralvenöser Silberionen-inkorporierter Katheter nach Seldinger mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser antimikrobielle Katheter hervorragend als Standardkatheter auf der Intensivstation zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie.


Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
2,8	8,5	20	-	8158.270	10304215
2,8	8,5	20	mit EKG-Kabel	8158.272	10354615
2,8	8,5	30	-	8158.370	10304221
2,8	8,5	30	mit EKG-Kabel	8158.372	10354621

Multicath 4 Expert Safe

Doppelt Sicher!

Vierlumiger zentralvenöser Silberionen-inkorporierter Katheter nach Seldinger mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250 für **mehr Patienten- und Anwendersicherheit** vor Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.

Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser **antimikrobielle Katheter** hervorragend als Standardkatheter auf der Intensivstation zur **Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen** und Blutentnahme bei polytraumatisierten Patienten ohne Unterbrechung der Infusionstherapie.

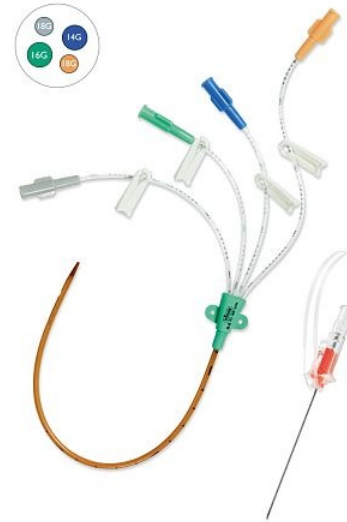

Alle Komponenten des Kathetersets sind so ausgelegt worden, dass die Gefahr von **Stichverletzungen** und den damit verbundenen Infektionsrisiken **auf ein Minimum reduziert wird**.

- **Silberionen**-inkorporierter Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen Polyurethan
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** **knickstabiler Sicherheits-Guide aus Nitinol** und **EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- die flexible, abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen

Katheter-Set:

- **Silberionen**-inkorporierter Katheter
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit zusätzlicher **EKG-Markierung** und Einhand-Einführhilfe
- wahlweise mit [EKG-Verbindungskabel](#) und [Safety-Skalpell](#)
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- Dilatator



+ Safety-Skalpell

Aktive Sicherung der Klinge nach der Hautinzision gemäß TRBA 250



+ combcard®

Schnelle und präzise Katheterplatzierung nach Seldinger mittels **Elektro-Kardio-Graphischer** Lagekontrolle

+ Kanülenspitze
leichte, gleichmäßige Gefäßpunktion mit optimierter Darstellung im Ultraschall durch Präzisions-Dreikantschliff



+ Fixierschleife
einfache und sichere Fixierung des Guides ohne Änderung der Angewohnheiten



+ Passives Sicherheitssystem

- **automatische Aktivierung**
- **Schutz vor Nadelstichverletzungen**
Container umschließt die Kanülenspitze beim Entfernen der Kanüle über den Guide
- **Vermeidung von Blutspritzern**
Container umschließt die blutgefüllte Kanülenspitze



+ Luer-Lock-Ansatz
sichere Konnektion von Einführhilfe oder Spritze



+ Flügeldesign
ergonomisches Flügeldesign zum leichten Vorschieben der Kanüle

+ Leichtgängiges Sicherheitssystem
geringer Gleitwiderstand des Sicherheitscontainers auf der Kanülenoberfläche



Spezifikationen

Katheter			Lumen G				EKG-Kabel					Art.-Nr.	VE	
Ømm	Fr	Lcm	Totr.-Vol. ml				Guide		SeldiSafe					
			Durchfl. ml/min				Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm			
			Dist.	Med.1	Med.2	Prox.								
2,8	8,5	20	16	14	18	18	0,88	60	1,26	18	70		8158.270	5
			0,38	0,54	0,53	0,36								
			56	100	15	14								
			16	14	18	18								
2,8	8,5	20	0,38	0,54	0,53	0,36	0,88	60	1,26	18	70	✓	8158.272	5
			56	100	15	14								
2,8	8,5	30	16	14	18	18	0,88	70	1,26	18	70		8158.370	5
			0,50	0,70	0,30	0,30								
			43	80	12	10								
			16	14	18	18	0,88	70	1,26	18	70	✓	8158.372	5
2,8	8,5	30	0,50	0,70	0,30	0,30								
			43	80	12	10								