

Multistar 4+ Safe von Vygon

Antimikrobieller Venenkatheter aus Polyurethan mit Sicherheitskanüle und Bloodless-System



Anzahl pro VE

5 Stück

Vierlumiger zentralvenöser Antibiotika- und Antimykotika- inkorporierter Katheter nach Seldinger mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250. Aufgrund seiner speziellen Wirkstoffkombination eignet sich dieser antimikrobielle Katheter für die Intensivstation bei Patienten mit stark eingeschränkter Immunabwehr.


Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
2,8	8,5	20	6158.270	10354696
2,8	8,5	30	6158.370	10354710

Multistar 4+ Safe

Rundum Sicher!

Vierlumiger zentralvenöser **Antibiotika- und Antimykotika-inkorporierter** Katheter nach Seldinger mit Sicherheits-punktionskanüle SeldiSafe gemäß TRBA 250 für **mehr Patienten- und Anwendersicherheit** vor Nadelstichverletzungen und den damit Verbundenen Infektionsrisiken.

Aufgrund **seiner speziellen Wirkstoffkombination** eignet sich dieser antimikrobielle Katheter auf der Intensivstation für **polytraumatisierte** Patienten mit **stark eingeschränkter Immunabwehr** zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie.

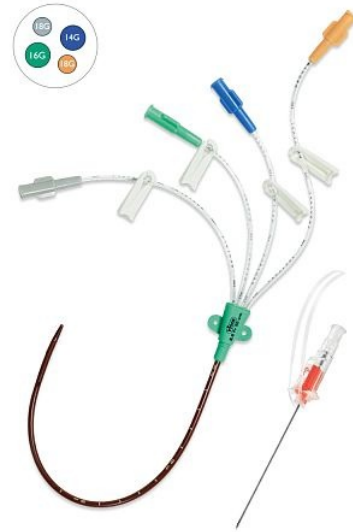


Alle Komponenten des Kathetersets sind so ausgelegt worden, dass die Gefahr von **Stichverletzungen** und den damit verbundenen Infektionsrisiken **auf ein Minimum reduziert wird**.

- Antibiotika- und Antimykotikainkorporierter Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- **Sicherheitspunktionskanüle** SeldiSafe mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** und **Blood-Less-System (BLS)** für eine blutarme Gefäßpunktion
- **Knickstabiler, teflonbeschichteter Sicherheits-J-Guide aus Nitinol mit EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- die flexible abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

Katheter-Set:

- **Antibiotika- und Antimykotikainkorporierter** Katheter
- **Sicherheitspunktionskanüle** SeldiSafe mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** und **Blood-Less-System (BLS)** für eine blutarme Gefäßpunktion
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit zusätzlicher **EKG-Markierung** und Einhand-Einführhilfe
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- Dilator

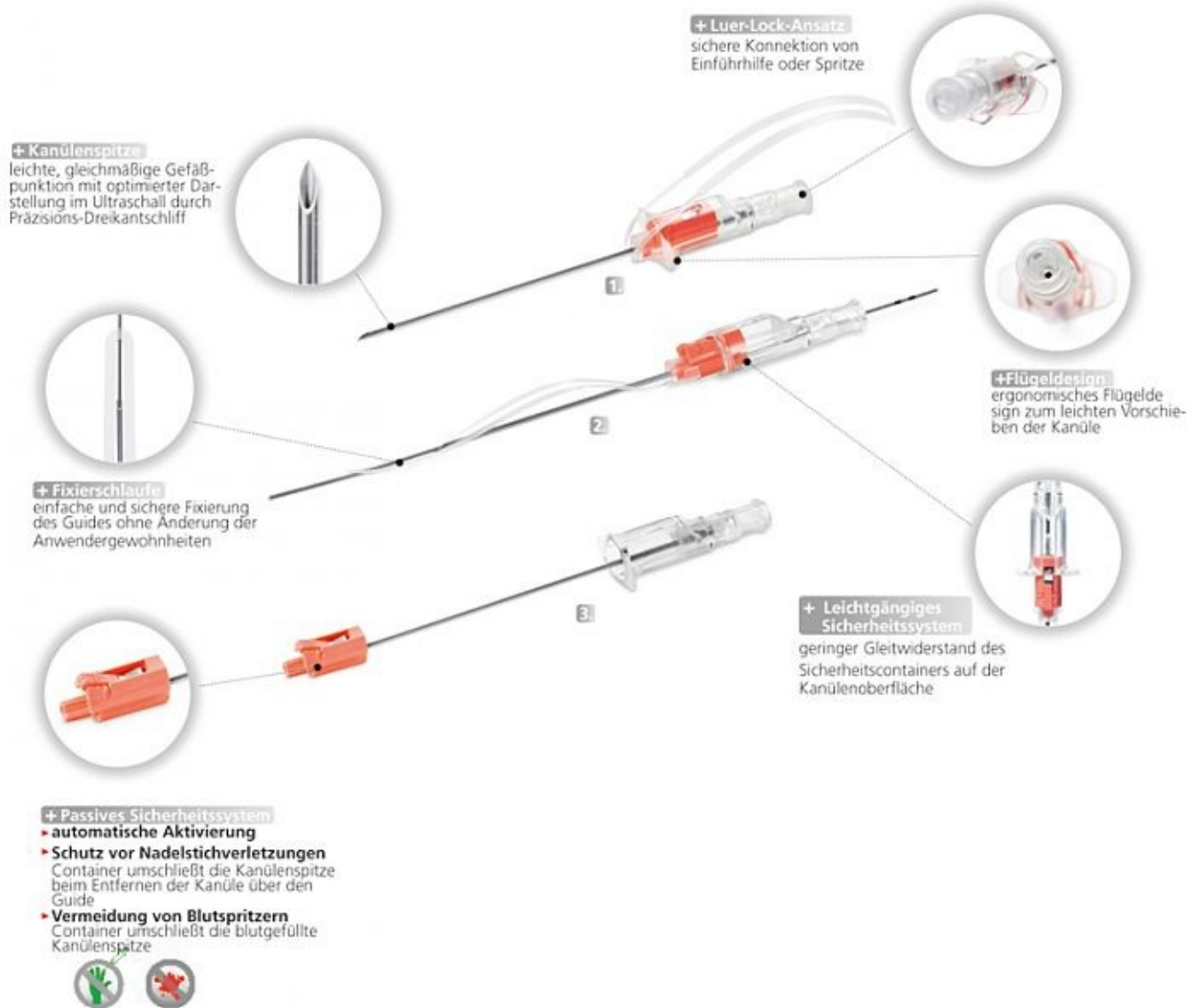

Spezifikationen

Katheter			Lumen G				Guide		SeldiSafe			Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	Lcm	Totr.-Vol. ml		Durchfl. ml/min		Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
			Dist.	Med.1	Med.2	Prox.							
2,8	8,5	20	16	14	18	18	0,88	60	1,26	18	70	6158.270	5
			0,38	0,54	0,53	0,36							
2,8	8,5	30	56	100	15	14	0,88	70	1,26	18	70	6158.370	5
			16	14	18	18							
			43	80	12	10							