


# Multistar 5+ Safe von Vygon

**Antimikrobieller Venenkatheter aus Polyurethan mit Sicherheitskanüle gemäß TRBA 250**

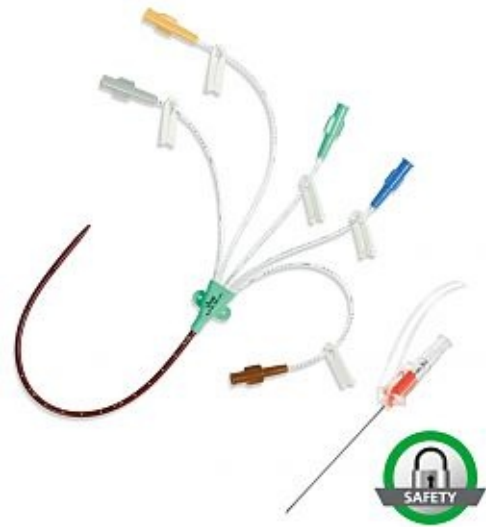

**Anzahl pro VE**

5 Stück

Fünflumiger zentralvenöser Antibiotika- und Antimykotika- inkorporierter Katheter nach Seldinger mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe für mehr Patienten -und Anwendersicherheit.

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
3,15	9,5	20	6159.270	10304103
3,15	9,5	30	6159.370	10304126

## Multistar 5+ Safe

### Rundum Sicher!

Fünflumiger zentralvenöser **Antibiotika- und Antimykotika-inkorporierter** Katheter nach Seldinger mit Sicherheits-punktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250 für **mehr Patienten- und Anwendersicherheit** vor Nadelstichverletzungen und den damit Verbundenen Infektionsrisiken.

Aufgrund **seiner speziellen Wirkstoffkombination** eignet sich dieser antimikrobielle Katheter auf der Intensivstation für **polytraumatisierte** Patienten mit **stark eingeschränkter Immunabwehr** zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie.




Alle Komponenten des Kathetersets sind so ausgelegt worden, dass die Gefahr von **Stichverletzungen** und den damit verbundenen Infektionsrisiken **auf ein Minimum reduziert wird**.

- Antibiotika- und Antimykotikainkorporierter Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- **Sicherheitspunktionskanüle** SeldiSafe mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** und **Blood-Less-System (BLS)** für eine blutarme Gefäßpunktion
- **Knickstabiler, teflonbeschichteter Sicherheits-J-Guide aus Nitinol mit EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- die flexible abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

### Katheter-Set:

- **Antibiotika- und Antimykotikainkorporierter** Katheter
- **Sicherheitspunktionskanüle** SeldiSafe mit optimierten, **echogenen Eigenschaften** und **Blood-Less-System (BLS)** für eine blutarme Gefäßpunktion
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit zusätzlicher **EKG-Markierung** und Einhand-Einführhilfe
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- Dilatator

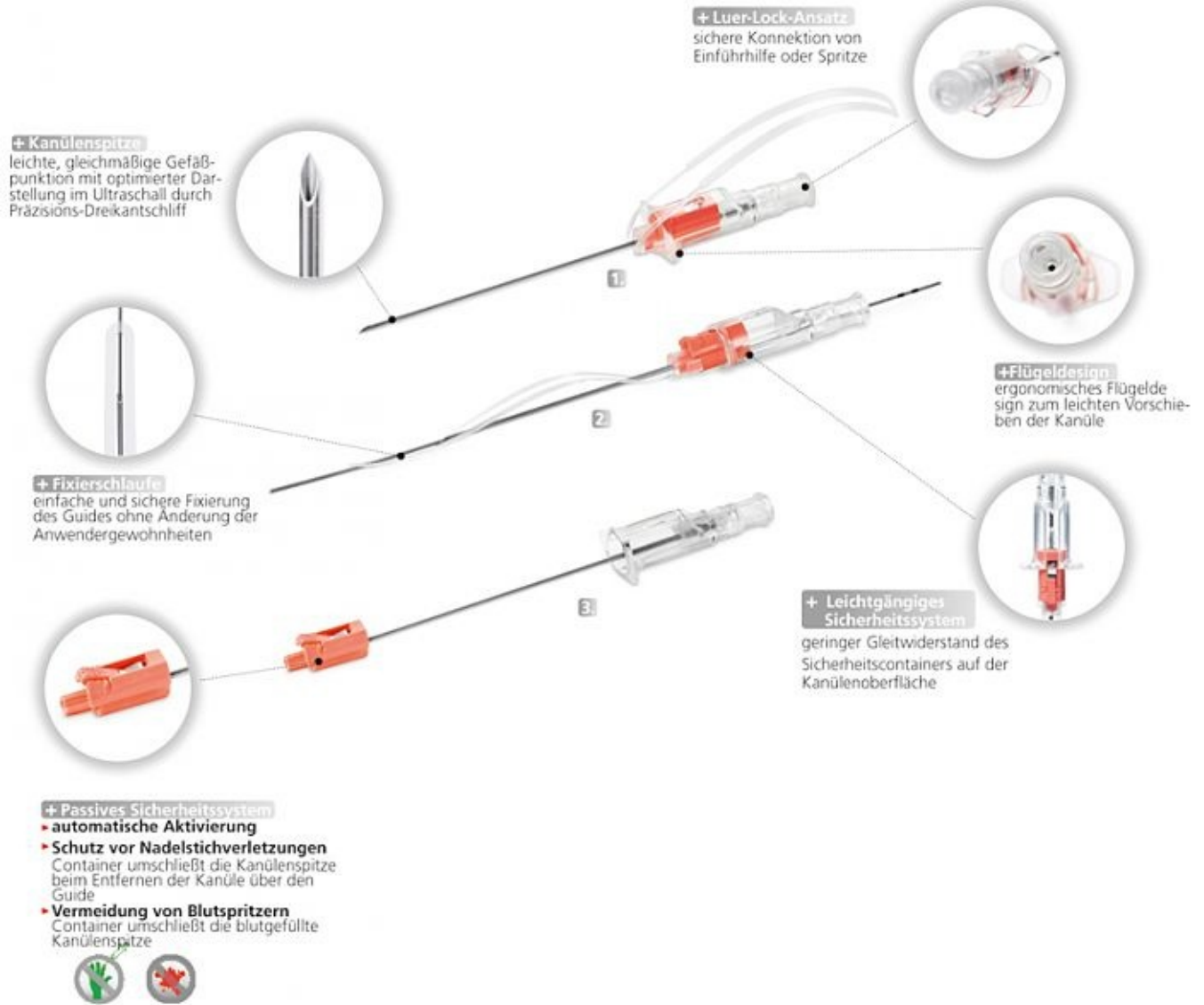

## Spezifikationen

Katheter			Lumen G					Guide		SeldiSafe		Art.-Nr.	VE	
Ømm	Fr	Lcm	Totr.-Vol. ml					Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
			Dist.	Med.1	Med.2	Med.3	Prox.							
3,15	9,5	20	16	14	18	18	18	0,88	60	1,26	18	70	6159.270	5
			0,47	0,60	0,39	0,38	0,43							
			55	80	15	12	17							
3,15	9,5	30	16	14	18	18	18	0,88	70	1,26	18	70	6159.370	5
			0,51	0,65	0,40	0,42	0,45							
			38	68	7,8	8,4	9,4							