

# Leadercath Safe

**Katheter aus Polyethylen zur peripheren Blutdruckmessung mit Sicherheitskanüle**



**Anzahl pro VE**

20 Stück

Katheter aus Polyethylen zur peripheren Blutdruckmessung mit Sicherheitskanüle

Katheter Ømm	Katheter G	Katheter Lcm	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
0,6 x 0,9	20	8	Zuleitung mit Autoflush	115.598	11125182

## Leadercath Safe

**Katheter zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, mit Sicherheitspunktionskanüle seldisafe® speziell für die Punktion der A. radialis**

Den bestmöglichen Schutz der Anwender vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr bieten Sicherheitsgeräte, deren Verwendung nach den Vorschriften der TRBA 250 verpflichtend ist.



### Setinhalt:

- Katheter
- Sicherheitspunktionskanüle **seldisafe®**
- Sicherheitsguide mit gerader, flexibler Spitze
- totauminimierte Zuleitung mit arteriellem **autoflush®**

## octopus® mit arteriellem autoflush®

Die druckfeste, totauminimierte Zuleitung mit autoflush® verringert die Gefahr von Gefäßwandverletzungen durch die Verlagerung des Manipulationsortes weiter weg von der Kathetereintrittsstelle.

Der autoflush® ist ein nadelfreies Konnektionssystem mit positivem Spülvolumen zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Prävention von Katheterspitzenokklusionen.




Der autoflush® gewährleistet geringen Blutverlust beim Wechsel von Druckmess-Systemen und reduziert die Infektionsgefahr auf ein Minimum. Er dient als Verschluss, solange kein Druckmess-System konnektiert ist.

## Seldisafe

### Mit Sicherheit - kein Risiko!

seldisafe® - Sicherheitspunktkanüle für die Seldingertechnik gemäß TRBA 250 zum Schutz der Anwender vor Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.

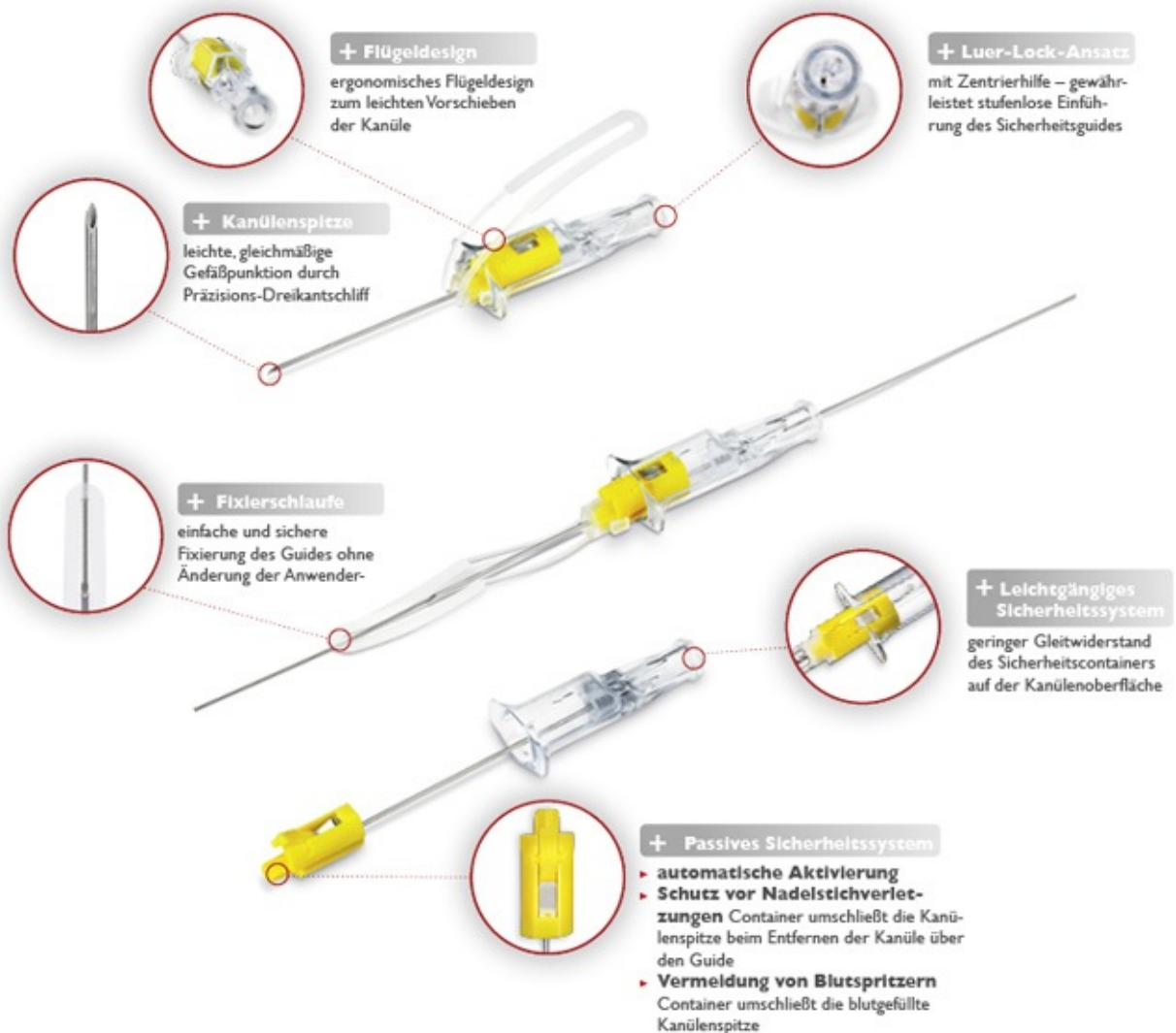

## Spezifikationen

Katheter			Guide		Seldisafe			Zuleitung mit Autoflush	Art.-Nr.	VE
Ømm	G	Lcm	Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm			
0,6 x 0,9	20	8	0,5	20	0,9	20	38	✓	115.598	20