

# Multicath 3 Expert Highflow Safe von Vygon

**Antimikrobieller Highflow-  
Venenkatheter aus PUR laut  
KRINKO-Empfehlung und mit  
Sicherheitskanüle gemäß TRBA  
250**



**Anzahl pro VE**

5 Stück

Dreilumiger Highflowkatheter nach Seldinger für eine schnelle und sichere Volumenersatztherapie mit inkorporierter Silberionentechnologie laut KRINKO-Empfehlung und gemäß TRBA 250 zum Schutz vor Nadelstichverletzungen – für mehr Patienten- und Anwendersicherheit.

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
3	9,0	12,5	8155.912	14339222
3	9,0	16,0	8155.916	14339239
3	9,0	20,0	8155.920	14339245

## Multicath 3 Expert HFS

### 3-Lumen Highflowkatheter laut KRINKO-Empfehlung

#### Doppelt Sicher!

Dreilumiger 9Fr-Highflowkatheter nach Seldinger mit inkorporierter Silberionentechnologie laut KRINKO-Empfehlung und gemäß TRBA 250 zum Schutz vor Nadelstichverletzungen mit einer Flussrate bis 200 ml/min für mehr Patienten- und Anwendersicherheit.

Zentraler Venenkatheter für eine schnelle und sichere Volumenersatztherapie bei drohendem Blutverlust im Rahmen eines Unfalls, größerer chirurgischer Eingriffe oder auf der Intensivstation bei polytraumatisierten oder septischen Patienten.



- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- die flexible Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler, teflonbeschichteter Sicherheits-J-Guide aus Nitinol und EKG-Markierung** ermöglicht eine einfache und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- EKG-Verbindungskabel für die schnelle und einfache Katheterplatzierung.
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

#### Katheter-Set:

- Katheter aus Polyurethan
- **Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®** mit optimierten, echogenen Eigenschaften
- **knickstabiler, teflonbeschichteter Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit zusätzlicher EKG-Markierung und Einhand-Einführhilfe
- **EKG-Kabel combcard®** (außer Katheterlänge 12,5 cm)
- **Sicherheitskalpell**
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- Dilatator



+ Safety-Skalpell

**Aktive Sicherung**  
der Klinge nach der  
Hautinzision gemäß  
TRBA 250



+ combcard®

Schnelle und  
präzise  
Katheterplatzierung  
nach Seldinger  
mittels **Elektro-  
Kardio-Graphischer**  
Lagekontrolle




+ Seldisafe

**passiver Sicherheits-  
mechanismus** zum  
Schutz vor  
adelstichverletzungen  
gemäß TRBA 250



+ Z-MAN-  
Sicherheitsklemme

zuverlässiges  
Abklemmen der  
Zuleitung durch  
einzigartiges  
Klemmendesign

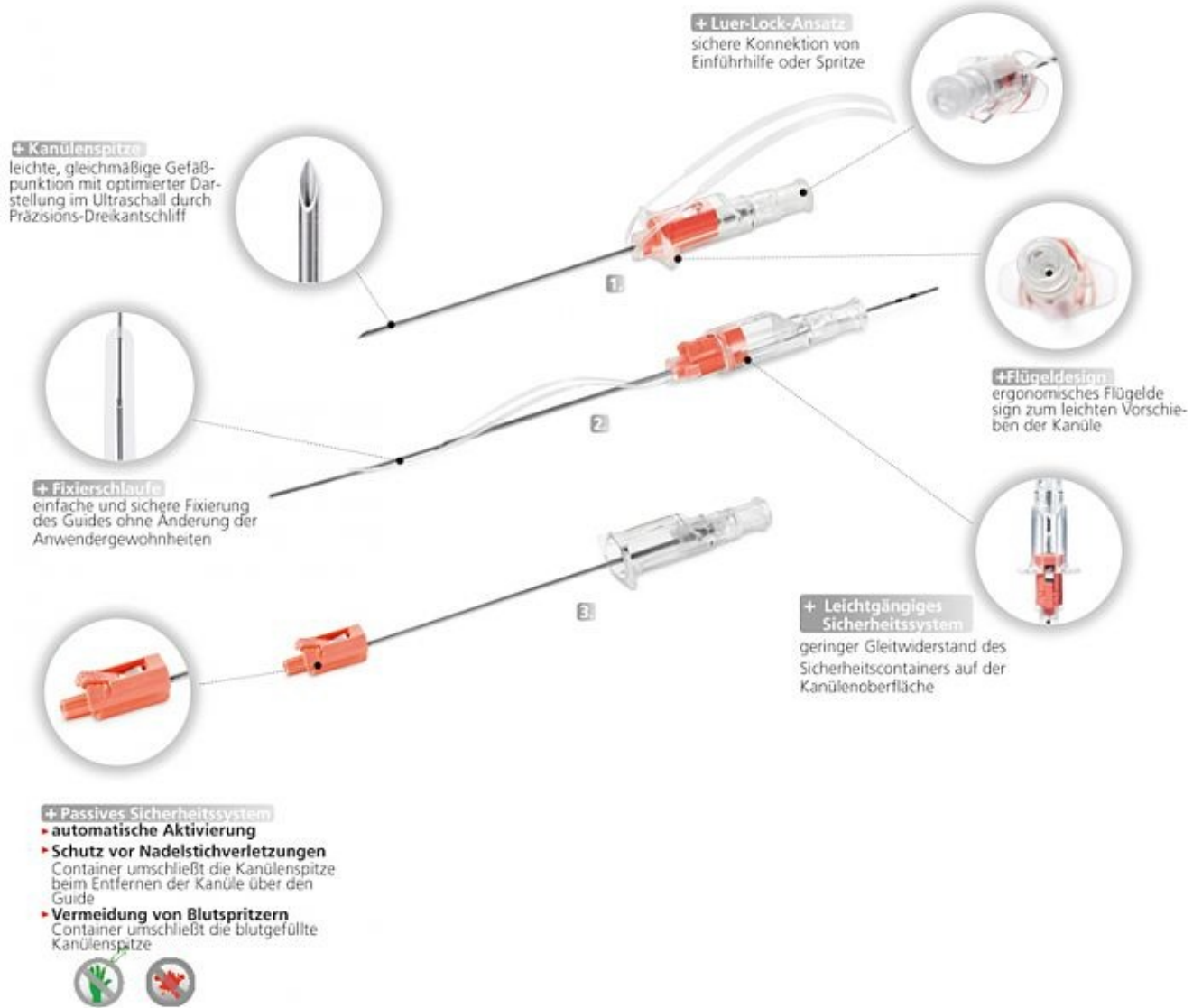

## Spezifikationen

Katheter			Lumen	Totr.-Vol.	Durchfl.	EKG-Kabel	Skalpelli	Art.-Nr.	V.E.
Ømm	Fr	Lcm	dist./med./prox. G	dist./med./prox. ml	dist./med./prox. ml/min		TRBA 250		
3	9,0	12,5	16/18/14	0,50/0,50/1,50	55/16/200	-	✓	8155.912	5
3	9,0	16,0	16/18/14	0,55/0,55/1,60	50/14/180	✓	✓	8155.916	5
3	9,0	20,0	16/18/14	0,65/0,65/1,80	45/12/160	✓	✓	8155.920	5