

Nutrifit - ENFit Ernährungssonden Silikon 50 cm von Vygon

**Ernährungssonden aus
weichem Silikon für erhöhten
Tragekomfort**



Anzahl pro VE

10 Stück

nutrifit – Silikon Ernährungssonden mit ENFit-Ansatz konform der ISO 80369-3. Durch das gewebefreundliche Silikonmaterial ergibt sich ein sehr hoher Tragekomfort für Patienten mit empfindlichen Schleimhäuten. Der Sicherheitsansatz minimiert das Risiko einer Fehlkonnektionen und Fehlapplikation. Dadurch werden Anwender und Patienten gleichermaßen geschützt.

Sonde Fr	Sonde Lcm	Farbcode	Art.-Nr.	PZN
8	50	hellblau	2331.087	14186907

Nutrifit – Silikon Ernährungssonden (ENFit™)

Nutrifit – Das Sicherheitssystem konform der ISO 80369-3



Die Verbindung der nutrifit Silikon Ernährungssonden mit Spritzen und Zubehör ist dank ihrer ENFit™ Konnektoren gemäß der ISO 80369-3 Norm sicher in der Anwendung. Das nutrifit System ist kein Luer-System und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden. Eine versehentliche Verwechslung und die damit verbundenen Risiken werden zuverlässig durch den normkonformen ENFit™-Ansatz ausgeschlossen.


Die nutrifit -Ernährungssonden aus Silikon sind auf Grund des Materials sehr weich und flexibel. Sie weisen eine hohe Bioverträglichkeit auf und enthalten keine Weichmacher. Aus diesem Grund gewährleisten sie einen sehr hohen Tragekomfort und sind besonders für Patienten mit empfindlichen Schleimhäuten geeignet. Durch das Gewinde wird eine sichere Schraubverbindung einfach und schnell gewährleistet.

Die Liegezeit der Silikon-Sonden beträgt bis zu 4 Wochen und ein Wechsel der Sonde sollte nach der individuellen Beurteilung des behandelnden Arztes vorgenommen werden.

- Konform ISO 80369-3
- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Männlicher nutrifit Ansatz
- Distal geschlossen mit zwei oder vier seitlichen Öffnungen
- Röntgenkontrastfähig
- Zentimetermarkierungen: 5 cm bis 35cm bzw. 70 cm
- Farbkodierung zur visuellen Größenbestimmung
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- Umfangreiches Zubehör
- DEHP frei
- Latex frei
- Einzeln steril verpackt

nutrifit® – Enterale Ernährungssonden

Mit ENFit™-Ansätzen ausgerüstet für eine sichere Ernährung konform der ISO 80369-3

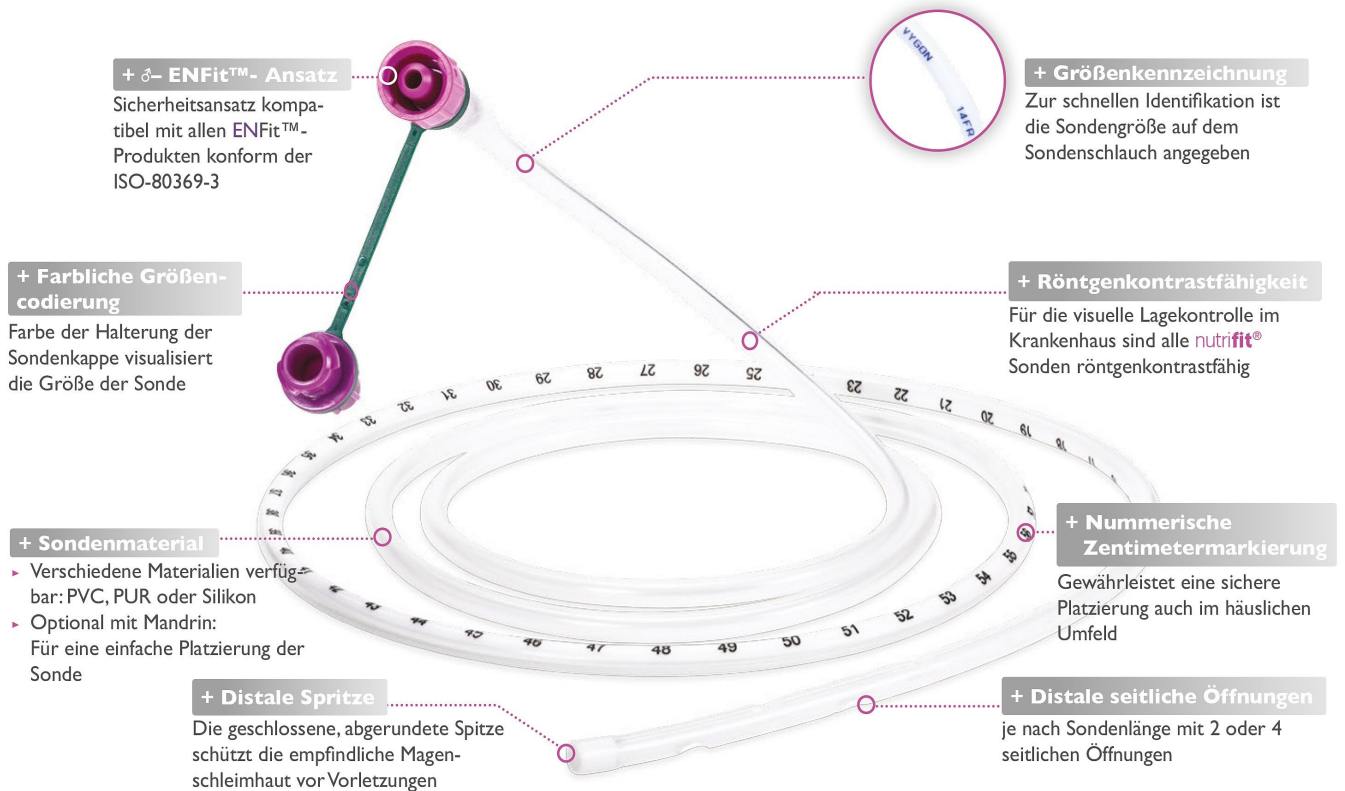

Spezifikationen

FR	Sonde	Lcm	Ansatzfarbe	Art.-Nr.	VE
8		50	blau	2331.087	10
FR	Sonde	Lcm	Ansatzfarbe	Art.-Nr.	VE
8		125	blau	2332.087	10
10		125	schwarz	2332.107	10
12		125	weiß	2332.127	10
14		125	dunkelgrün	2332.147	10