



INTRAVASCULAR THERAPIES

Vaskuläre Zugänge

PICC-Katheter



Seite	Inhalt
3	Einführung
4	Kathetermatrix
5	Katheteranlage
5	Platzierung
5	ZIM™ -Methode
5	Fixierung
6-9	Platzierung
6	PICC Platzierungs-Basisset
7	PICC Platzierungs-Komplettset
8	PICC Platzierungs-All in One
9	vygo card
10-21	PICC-Katheter
10	Übersicht
11-13	lifecath PICC pur
14-16	lifecath CT PICC easy
17	repairset lifecath CT PICC easy
18-20	maxflo flo expert
21	expert® - Silberionentechnologie
22-29	Pflege
22	picc pflegeset
23	IV-Versorgungs-Set
24	IV-Versorgungs-Set Plus
25	Grip- Lok® 3 in 1
26	bionector®
27	bionector TKO®
28	octopus® mit bionector TKO®
29	3M™ Curos™
30	YGON – Partner des PICC-Netzwerkes
31	Podcast I.V. 360°

Einführung

PICC-Katheter sind peripher eingeführte, zentrale Venenkatheter (**P**eripherally **I**nserted **C**entral **C**atheter).

Die Katheter eignen sich für i.v.-Therapien die länger als 30 Tage andauern, z.B. Antibiotika-, Schmerz- und Chemotherapien, sowie zur parenteralen Ernährung.

Auch Patienten, die aufgrund einer Portinfektion kurzfristig einen alternativen Zugang benötigen, bietet der PICC-Katheter eine Alternative.

Der Vorteil gegenüber gängigen Kathetern, wie beispielsweise Ports, ist, dass **keine Operation notwendig** ist – sowohl bei der Anlage als auch bei der Explantation.

Bei entsprechender Ausstattung der Krankenhäuser kann die Anlage am Patientenbett (maximale Barrieremaßnahmen eingehalten) durchgeführt werden.


Sie erhöhen zudem die Patientenzufriedenheit, da der Patient lediglich einmal bei der Anlage des Katheters punktiert werden muss.

Patienten mit PICC-Kathetern können nach Hause entlassen werden und im ambulanten Setting optimal weiter versorgt werden.

Im PICC-Netzwerk arbeitet Vygon eng mit Home-care-Dienstleistern zusammen, die sich auf die außer-klinische i.v.-Therapie spezialisiert haben.



Kathetermatrix "venöse Gefäßzugänge" – Erwachsene und Kinder (> 10 kg)

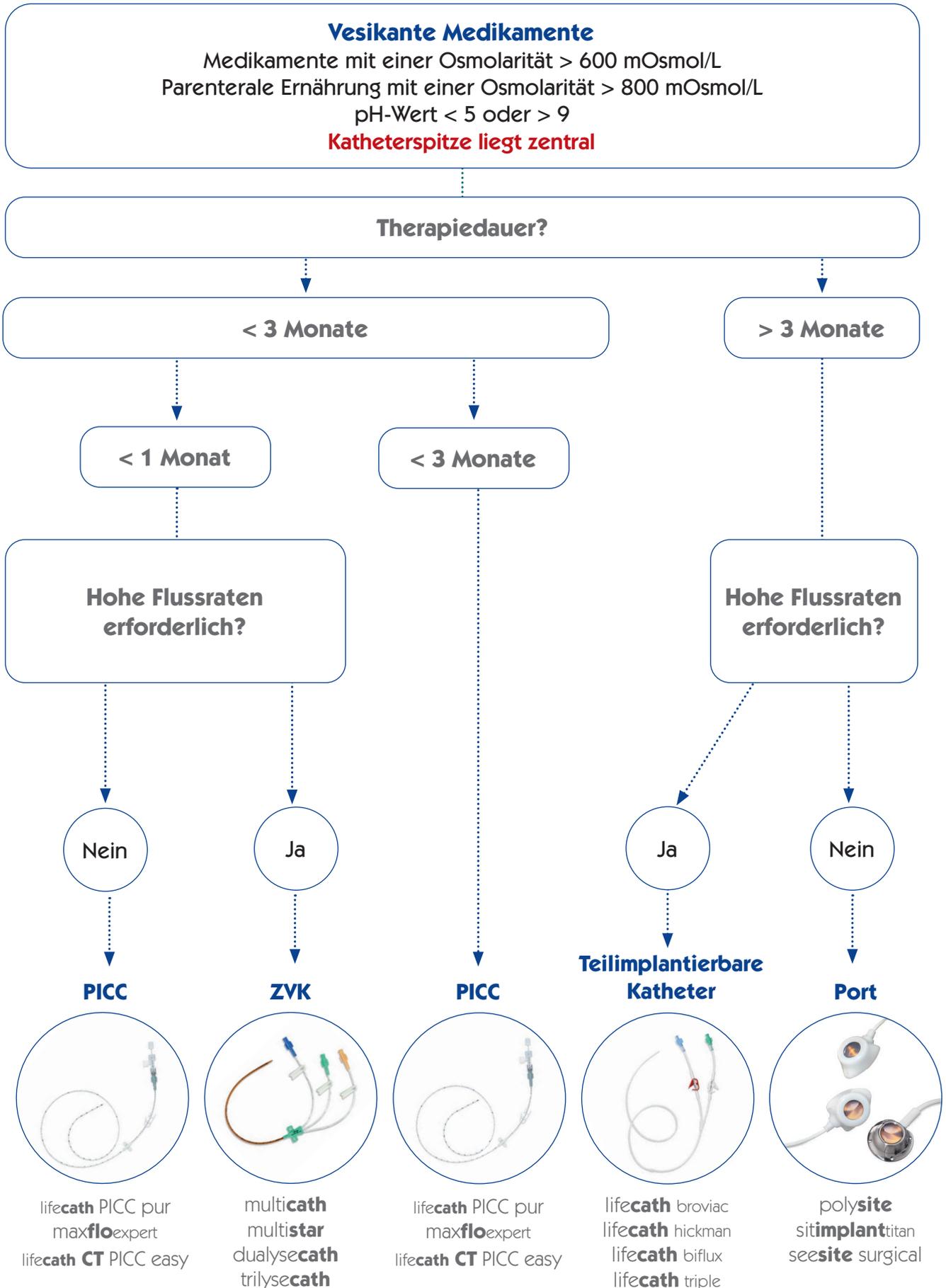

Katheteranlage

Platzierung

PICC-Katheter werden in einer peripheren Vene (V. basilica, V. brachialis oder V. cephalica) am Oberarm platziert und bis zum cavoatrialen Übergang (Übergang von oberer Hohlvene zum rechten Herzvorhof) vorgeschoben. Dabei sollte die **ZIM™**-Methode berücksichtigt werden.⁽¹⁾ Zur Lokalisation der richtigen Vene wird ein Ultraschallgerät eingesetzt und der Katheter mit Hilfe der Seldinger-Technik platziert. Die Lagekontrolle der Katheterspitze wird mittels EKG, P-Wellen-Interpretation, Ultraschall oder Röntgen durchgeführt.

Was ist die ZIM™-Methode?

Die **ZIM™** (**Z**one **I**nsertion **M**ethod™) beschreibt eine einheitliche Handhabung (Standardisierung) und dadurch Minimierung der Komplikationsrate bei der PICC-Katheter-Anlage. Der Oberarm wird bei der **ZIM™** – Methode in drei Zonen aufgeteilt:



Die grüne Zone stellt die optimale Zone zur Punktion dar. Es kann aufgrund des Venenverlaufs aber auch schon einmal nötig sein, den Katheter in der gelben Zone zu legen. Vermieden werden sollte die rote Zone!

Fixierung

Periphere Venenkatheter werden nicht angenäht, sondern mit einer speziellen Fixierhilfe fixiert (z.B. **Grip-Lok® 3 in 1**, siehe dazu auch S. 25). Dies ermöglicht eine bessere Desinfizierung des Katheters im Vergleich zu einer Nahtstelle. Die Fixierhilfe muss wöchentlich zusammen mit dem Transparentverband und dem nadelfreien Konnektor gewechselt werden.

Literatur:

[1] Dawson, Robert. (2011). PICC Zone Insertion Method™ (ZIM™): A systematic approach to determine the ideal insertion site for PICCs in the upper arm. Journal of the association for Vascular Access. 16. 156-165.

PICC Platzierungs-Komplettset

Für eine präzise und hygienische Katheteranlage unter Sicht

Setinhalt:

- ▶ Kittel (XL)
- ▶ Einschlagtuch (100 cm x 120 cm)
- ▶ Abdecktuch (75 cm x 90 cm)
- ▶ Lochtuch peelbar (100 cm x 80 cm)
- ▶ 10 Mullkompressen (10 cm x 10 cm)
- ▶ Stieltupfer
- ▶ Ultraschallgel (20 ml)
- ▶ 2 blaue Gummibänder
- ▶ Sondenüberzug (15 mm x 120 mm)
- ▶ 1 Spritze (5 ml)
- ▶ 2 Spritzen (10 ml)
- ▶ Safety-Stichkanüle 25 G
- ▶ Dermofilm (10 cm x 10 cm)
- ▶ 2 Ablageschalen



Produktbezeichnung	Art.-Nr.	V.E.
PICC/Midline Platzierungs-Komplettset	V02771714	4

PICC Platzierungsset-All in One

Das optimale Set mit allen Komponenten für eine schnelle und sichere Katheterplatzierung

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (100 cm x 120 cm)
- ▶ Blaue Schale
- ▶ Weißer Tupferbecher
- ▶ Roter Tupferbecher
- ▶ 2 kleine Stieltupfer
- ▶ 10 Kompressen mit Röntgenkontraststreifen (10 cm x 10 cm)
- ▶ Aufziehkanüle (18 G, 40 mm)
- ▶ Stichkanüle (21 G, 40 mm)
- ▶ Stichkanüle (25 G, 16 mm)
- ▶ 2 gefüllte NaCl 0,9 % Spritzen (10 ml)
- ▶ Spritze (5 ml)
- ▶ Lochtuch PICC (240 cm x 235 cm)
- ▶ Stauschlauch vene-k®
- ▶ Ultraschallgel (20 g)
- ▶ Sondenüberzug (15 mm x 120 mm)
- ▶ Sticksissen
- ▶ OP-Kittel XL
- ▶ Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)



Sondenüberzug, Gel

Der Sondenüberzug und das sterile Gel gewährleisten eine **hygienisch einwandfreie ultraschallgestützte** Punktion.



Stauschlauch vene-k®

Für den Einmalgebrauch mit Quick-Release Funktion – der **optimale Schutz gegen Kreuzkontaminationen** mit MRE Infektionen bei der Patientenversorgung.



Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs.

Produktbezeichnung

Picc/Midline Platzierungsset-All in One

Art.-Nr.

199.2214V


V.E.

6

Präzision und Sicherheit ohne Kompromisse

EKG-Verbindungskabel für die schnelle, einfache und präzise Platzierung zentralvenöser Katheter über die leitende Flüssigkeitssäule

- ▶ EKG-Ableitungskabel mit Druckknopfadapter und Verbinder mit Luer-Lock-Ansatz
- ▶ Druckknopfadapter zum Anschluss an die Klemme der rechtsthorakalen EKG-Ableitung aller gängigen Monitorkabel im Krankenhaus
- ▶ Verbinder zum Anschluss an das proximale Ende des mit Kochsalzlösung gefüllten Katheters
- ▶ Die Lagekontrolle der distalen Katheterspitze erfolgt simultan beim Vorschieben des Katheters durch Interpretation der P-Welle

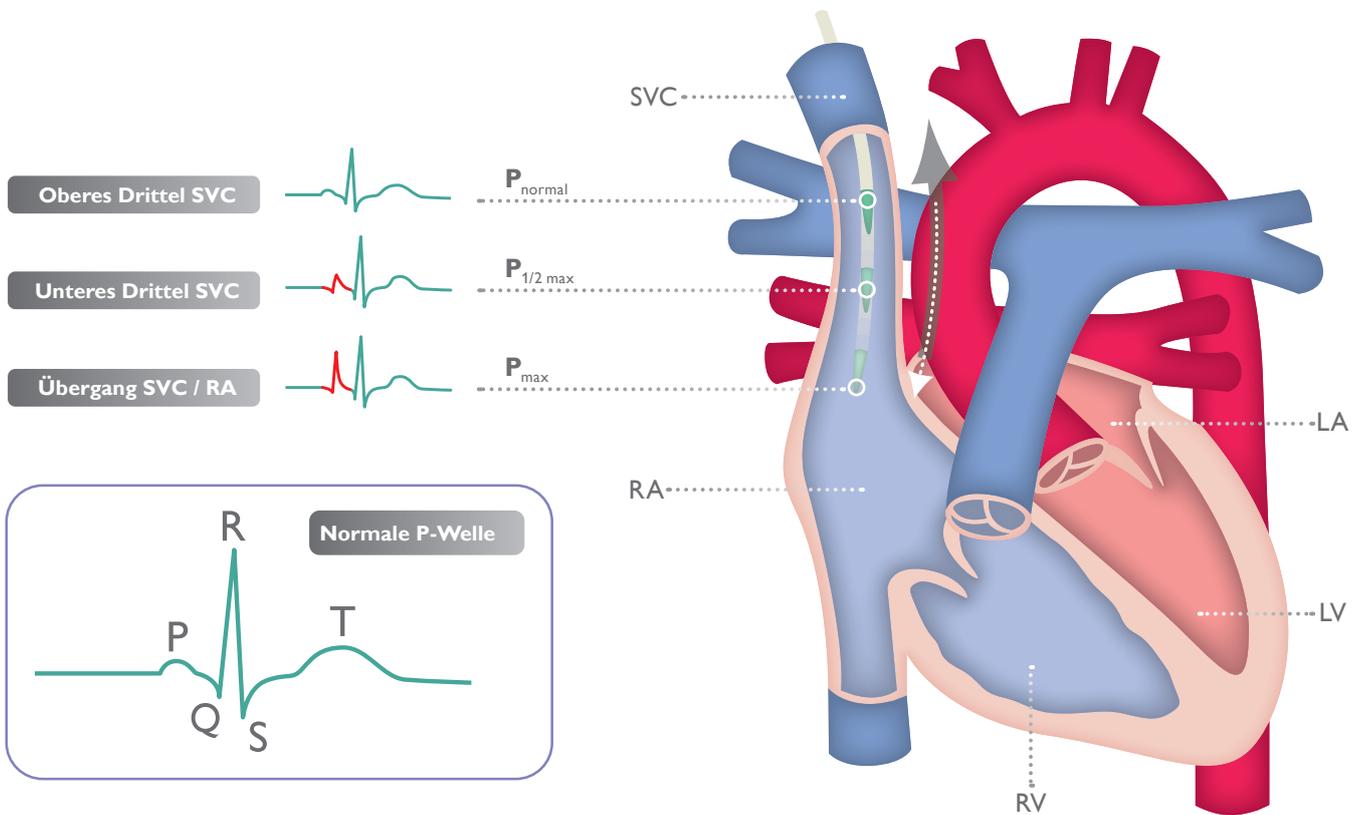

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	V.E.
vygocard	9164.002	20

Übersicht PICC-Katheter


	lifecath PICC pur	lifecath CT PICC easy	maxfloexpert
Liegedauer > 30 Tage	Ja	Ja	Ja
Material	PUR	PUR	PUR expert (Silberionen)
Silberionen inkorporiert	Nein	Nein	Ja
Hochdruckeignung	Nein	Ja (325 psi, 22,4 bar)	Ja (325 psi, 22,4 bar)
Längenmarkierung	Ja	Ja	Ja
Röntgenkontrastfähig	Ja	Ja	Ja
Arten der Lagekontrolle	EKG, Röntgen, Ultraschall	EKG, Röntgen, Ultraschall	EKG, Röntgen, Ultraschall
Anzahl Lumen	1 und 2 Lumen	1 Lumen	1, 2 und 3 Lumen
Besonderheiten		weltweit einzigartig: kann nach der Platzierung am proximalen Katheterende gekürzt werden	Silberionentechnik zur Infektionsprävention

Vorteile von PICC-Kathetern:

stabiler, zentralvenöser Zugang




Patienten können früher entlassen werden, da Möglichkeit der ambulanten Infusionstherapie

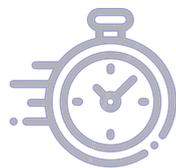

individuelle Liegedauer



Alternative zum Port

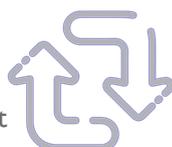

Vermeidung von Mehrfachpunktionen




lifecath PICC pur – Mikro-Seldinger-Technik (MST)

- ▶ Ein- und zweilumiger PUR-Katheter
- ▶ Platzierung in Mikro-Seldinger-Technik
- ▶ Liegezeit > 30 Tage

Setinhalt:

- ▶ Echogene Sicherheitspunktkanüle (Ø 21 G, L 70 mm)
- ▶ Peelbare Schleuse (Größe entsprechend des Katheters, L 7 cm)
- ▶ Sicherheitskalpell
- ▶ **bionector®**
- ▶ Nitinolguide mit Einhandeinführhilfe (Ø 0,46 mm, unterschiedliche Längen)
- ▶ 10 ml Spritze
- ▶ Fixierhilfe Grip-Lok®
- ▶ Maßband

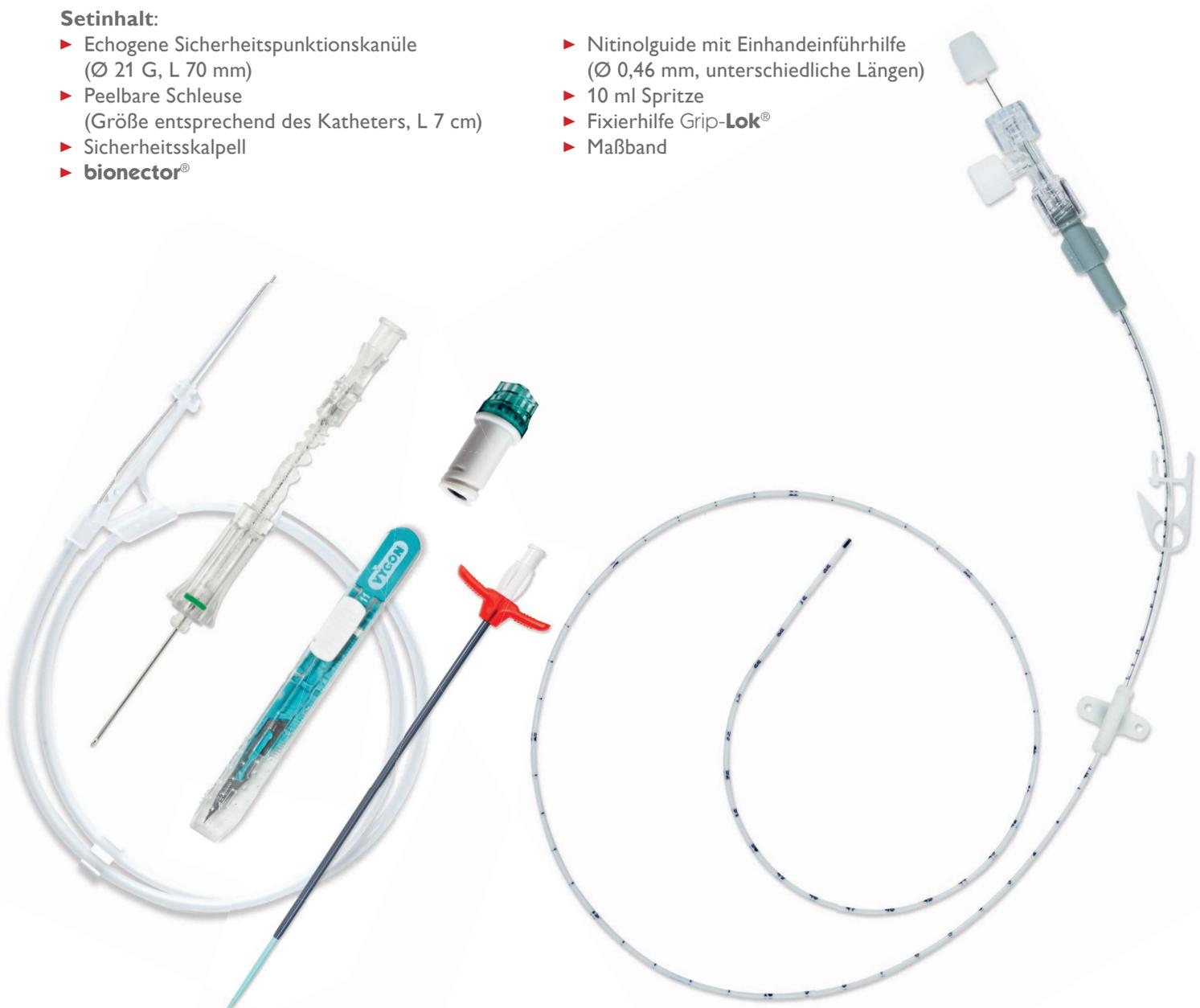


Katheter				Totr.-Vol.	Durchfl.	Art.-Nr.			V.E.
Ømm	Fr	Lcm	Lumen	ml	ml/min	MST Einführbesteck mit Guide Ø 0,46 mm			
						L 50 cm	L 67 cm	L 135 cm	
1,00	3	60	1	0,46	1,6	1294.113	-	-	10
1,35	4	60	1	0,66	9,4	1294.114	1294.414	1294.514	10
1,67	5	60	1	1,00	36	1294.115	1294.415	1294.515	10
1,50	4,5	60	2	0,50 / 0,50	8,2 / 8,2	1294.345	1294.445	1294.545	10

lifecath PICC pur

Ein- und zweilumiger PICC aus vollkontrastgebendem PUR für intermittierende, medikamentöse Therapien >30 Tage im stationären und ambulanten Bereich

Therapiefelder u. a.:

- ▶ Chemotherapie
- ▶ Totale parenterale Ernährung (TPN)
- ▶ Antibiotherapie

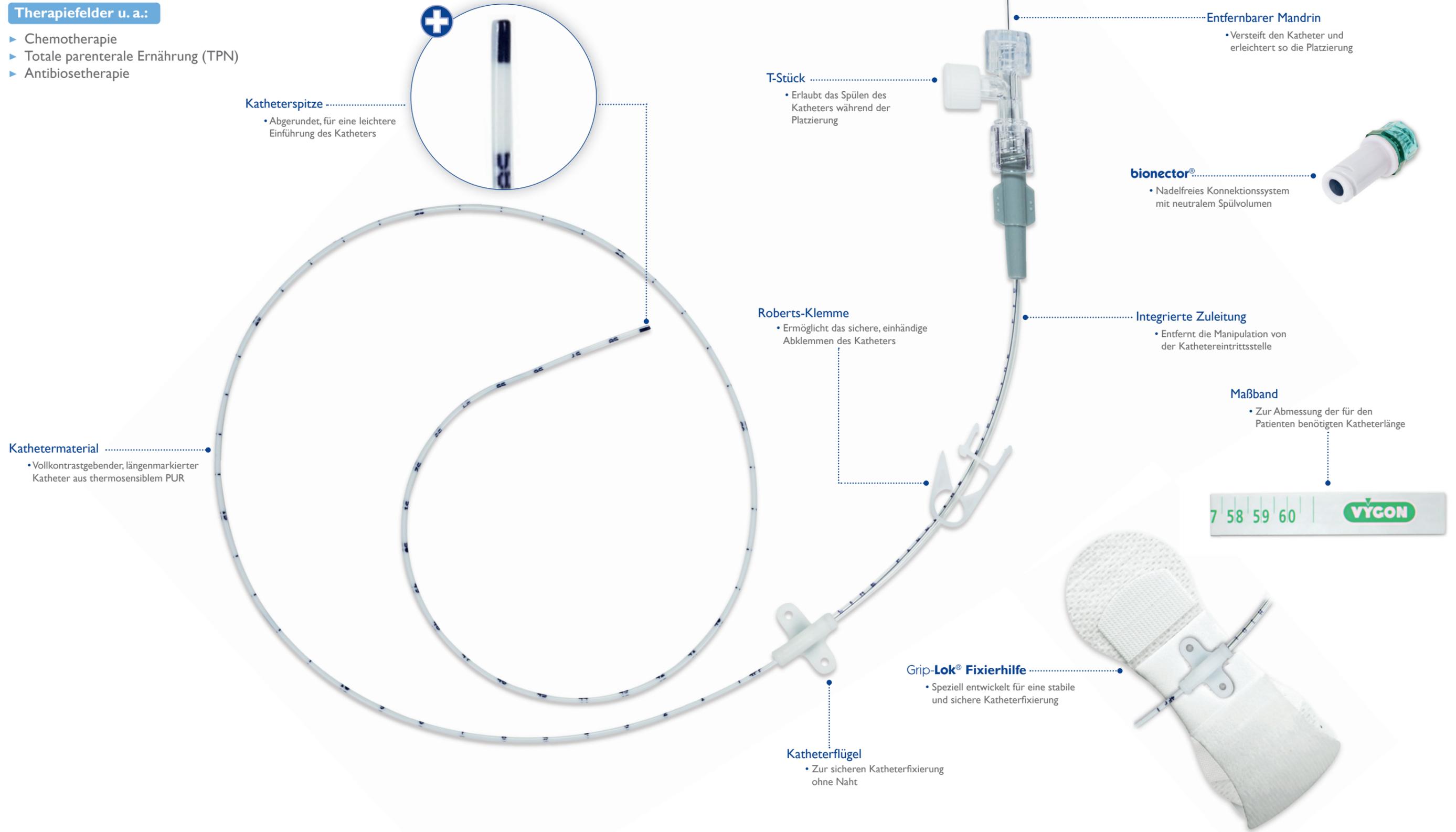


lifecath CT PICC easy

Der weltweit einzige PICC, der nach der Platzierung am proximalen Katheterende gekürzt und damit individuell an den Patienten angepasst werden kann.

Therapiefelder u. a.:

- ▶ Angiographie
- ▶ Chemotherapie
- ▶ Totale parenterale Ernährung (TPN)
- ▶ Antibiotherapie

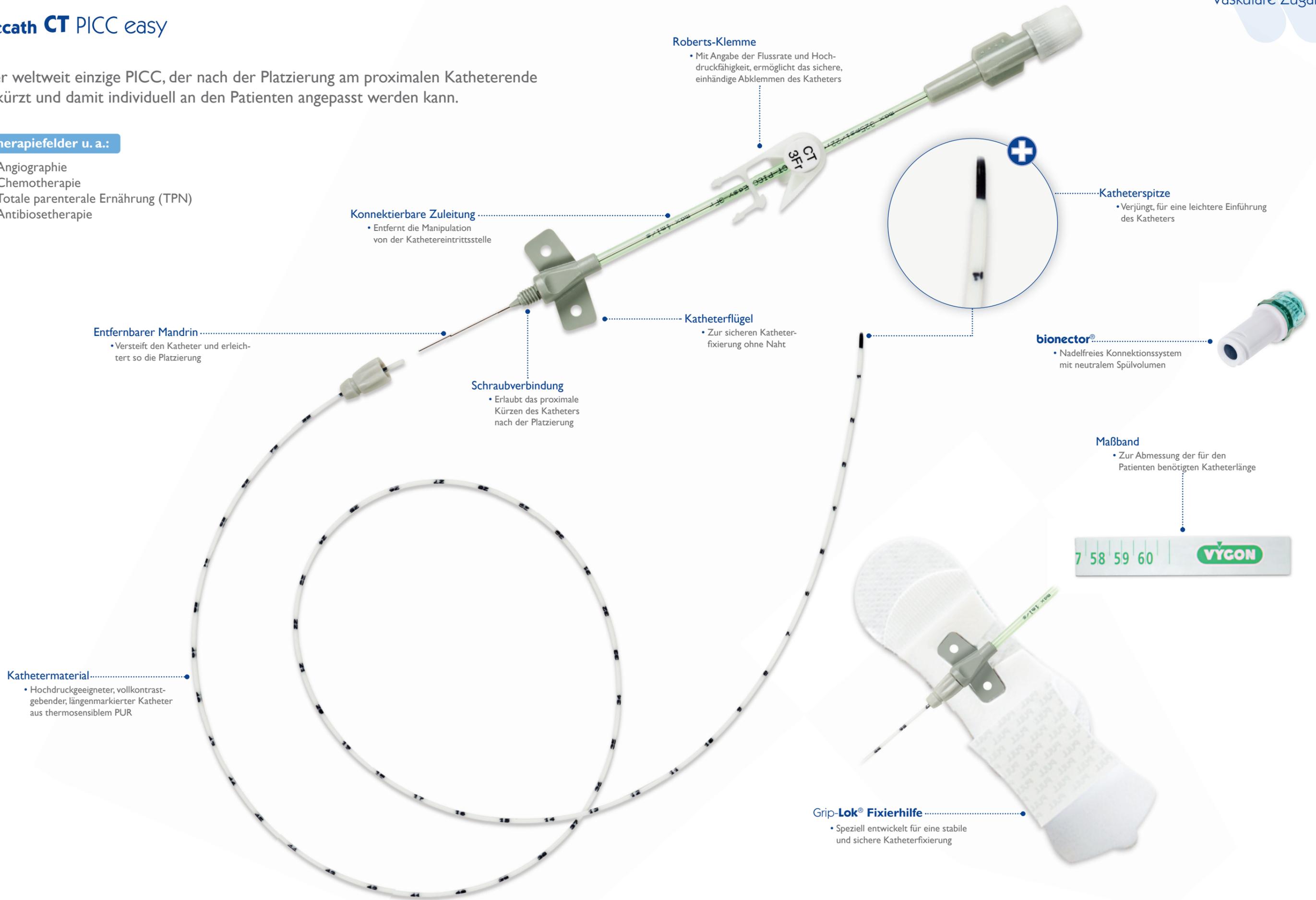

Roberts-Klemme

- Mit Angabe der Flussrate und Hochdruckfähigkeit, ermöglicht das sichere, einhändige Abklemmen des Katheters

Konnectierbare Zuleitung

- Entfernt die Manipulation von der Kathedereintrittsstelle

Entfernbarer Mandrin

- Versteift den Katheter und erleichtert so die Platzierung

Schraubverbindung

- Erlaubt das proximale Kürzen des Katheters nach der Platzierung

Katheterflügel

- Zur sicheren Katheterfixierung ohne Naht



Katheterspitze

- Verjüngt, für eine leichtere Einführung des Katheters

bionector®

- Nadelfreies Konnektionssystem mit neutralem Spülvolumen

Maßband

- Zur Abmessung der für den Patienten benötigten Katheterlänge



Kathetermaterial

- Hochdruckgeeigneter, vollkontrastgebender, längenmarkierter Katheter aus thermosensiblen PUR

Grip-Lok® Fixierhilfe

- Speziell entwickelt für eine stabile und sichere Katheterfixierung

lifecath CT PICC easy

- ▶ Zweiteiliger, peripherer zentraler Venenkatheter
- ▶ Hochdruckgeeignet bis 325 psi (22,4 bar)
- ▶ Nach Platzierung kürzbarer Katheter, sodass die verjüngte Katheterspitze im Gefäß liegt
- ▶ Platzierung in Mikro-Seldinger-Technik
- ▶ Liegezeit > 30 Tage

max.
325 PSI
22,4 bar

Setinhalt:

- ▶ Echogene Sicherheitspunktionskanüle (Ø 21 G, L 70 mm)
- ▶ Peelbare Schleuse (Größe entsprechend des Katheters, L 7 cm)
- ▶ Sicherheitsskalpell
- ▶ **bionector®**
- ▶ Nitinolguide mit Einhandeinführhilfe (Ø 0,46 mm, L 50 cm und L 135 cm)
- ▶ 10 ml Spritze
- ▶ Schiebeklemme
- ▶ Fixierhilfe Grip-Lok®
- ▶ Maßband
- ▶ Zuleitung



Ømm	Katheter			Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min Schwerkraft	max. Durchfl.* ml/s 325 psi (22,4 bar)	Art.-Nr.		V.E.
	Fr	Lcm	Lumen				MST-Einführbesteck mit Guide Ø 0,46 mm L 50 cm	L 135 cm	
1,00	3	60	1	0,60	3,0	1	V021292213	-	10
1,35	4	60	1	0,90	14	4	V021292214	V021292514	10
1,67	5	60	1	1,00	28	6	V021292215	V021292515	10

* bei einer Viskosität von 11.8 mPas

repairset lifecath CT PICC easy

Repairset zum Austausch der lifecath CT PICC easy Katheterzuleitung

Setinhalt:

- ▶ Extensionsleitung mit Einführmandrin
- ▶ Hochdruckgeeignet bis 325 psi (22,4 bar)
- ▶ **bionector**[®]
- ▶ Schiebeklemme
- ▶ Fixierhilfe Grip-Lok[®]




Produktbezeichnung	für Art.-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
repairset lifecath CT PICC easy [®]	V021292213	1293.203	10
repairset lifecath CT PICC easy [®]	V021292214 V021292514	1293.204	10
repairset lifecath CT PICC easy [®]	V021292215 V021292515	1293.205	10

maxfloexpert – Der hochdruckgeeignete, antimikrobielle PICC

Aus vollkontrastgebendem PUR für intermittierende, medikamentöse Therapien
>30 Tage im stationären und ambulanten Bereich

Therapiefelder u. a.:

- ▶ Chemotherapie
- ▶ Totale parenterale Ernährung (TPN)
- ▶ Antibiosetherapie

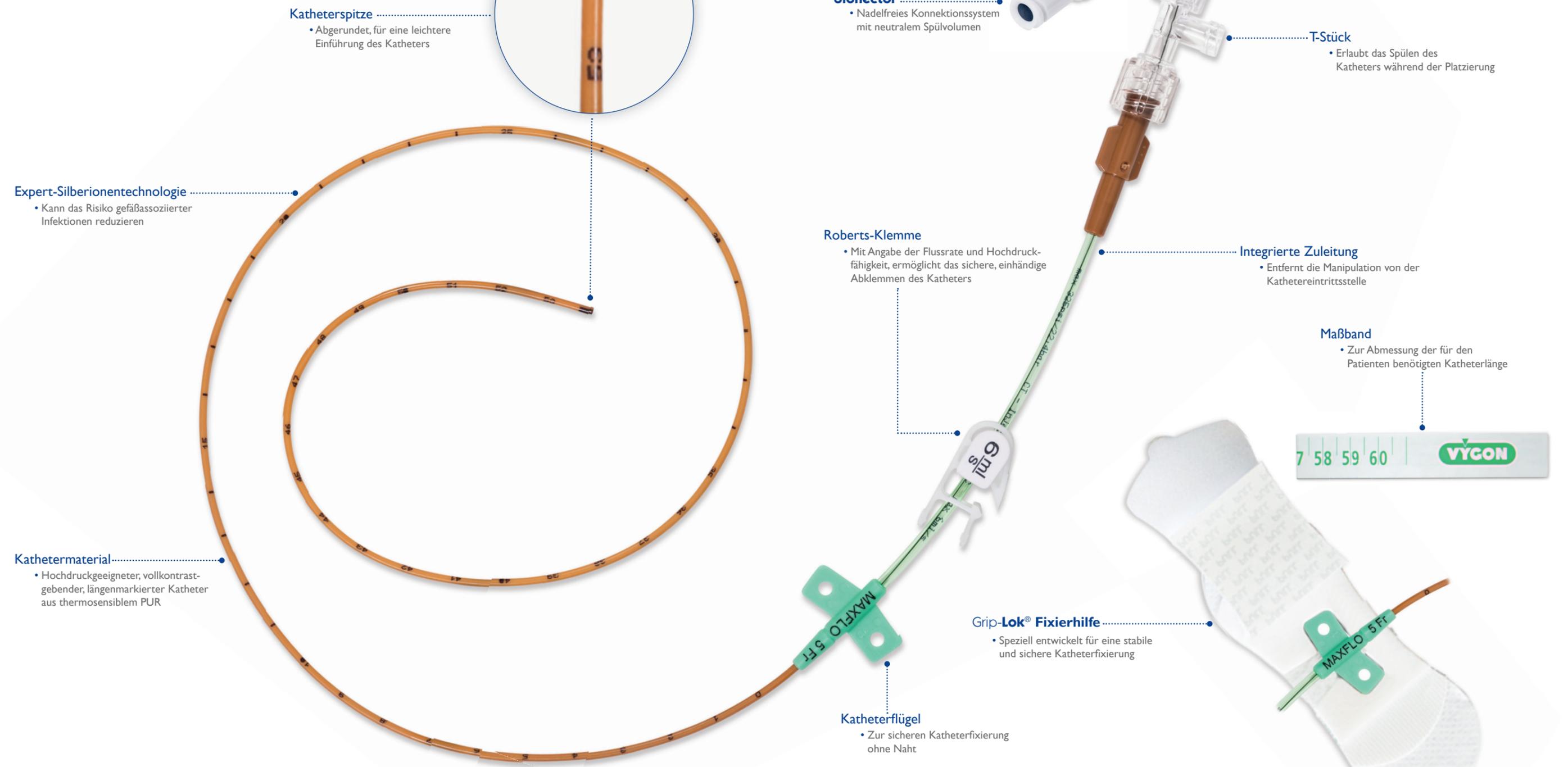

* bei einer Viskosität von 11.8 mPas

max.
325 PSI
22,4 bar

- ▶ Ein-, zwei- und dreilumiger, antimikrobieller, vollkontrastgebender PUR-Katheter
- ▶ Hochdruckgeeignet bis 325 psi (22,4 bar)
- ▶ Platzierung in Mikro-Seldinger-Technik
- ▶ Liegezeit > 30 Tage

Setinhalt:

- ▶ Echogene Sicherheitspunktionskanüle (Ø 21 G, L 70 mm)
- ▶ Peelbare Schleuse (Größe passend zum Katheter, L 7 cm)
- ▶ Sicherheitsskalpell
- ▶ **bionector®**
- ▶ Nitinolguide mit Einhandeinführhilfe (Ø 0,46 mm, unterschiedliche Längen)
- ▶ 10 ml Spritze
- ▶ Fixierhilfe Grip-Lok®
- ▶ Maßband



Katheter				Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min Schwerkraft	max. Durchfl.* ml/s 325 psi (22,4 bar)	Art.-Nr.			V.E.
Ømm	Fr	Lcm	Lumen				MST Einführbesteck mit Guide Ømm 0,46 mm	L 50 cm	L 67 cm	
1,35	4	55	1	0,80	17,0	5	8394.14	8394.414	8394.514	10
1,75	5	55	1	1,00	46,0	7	8394.105	8394.405	8394.505	10
1,75	5	55	2	0,75 / 0,75	9,0 / 9,0	5	8394.25	8394.425	8394.525	10
2,00	6	55	2	0,80 / 0,80	14,0 / 14,0	6	8394.206	8394.406	8394.506	10
2,00	6	55	3	0,45 / 0,45 / 0,85	4,0/4,0/10,0	5	8394.36	8394.436	8394.536	10

* bei einer Viskosität von 11.8 mPas

expert®- Silberionentechnologie


Wirkstoffinkorporation

Der wesentliche Bestandteil der expert®-Technologie ist die **patentierete Silberverbindung agion®** Nature's antimicrobial, die in das Kathetermaterial eingearbeitet ist. agion® Nature's antimicrobial ist **ionisiertes Silber** und damit ein Antimikrobiotikum mit nachgewiesener Wirksamkeit und Langlebigkeit. Es wirkt gegen die häufigsten Erreger von Katheter-assoziierten Sepsen, darunter grampositive und gramnegative Bakterien und Pilze.

Wirkstofffreisetzung

Bei Kontakt des Katheters mit Blut, Körperflüssigkeiten oder Infusionslösungen werden Silberionen sehr langsam und kontinuierlich (Slow-Release-System) aus dem agion® Nature's antimicrobial-System freigegeben und unterdrücken so das mikrobielle Wachstum im Katheterlumen und im Biofilm des Katheters. Dadurch wird das Auftreten Katheter-assoziiierter Sepsen auf ein Minimum reduziert!

Aufgrund des enormen Wirkstoffdepots an Silberionen entfaltet sich die antimikrobielle Wirkung über die gesamte Einsatzdauer des Katheters!

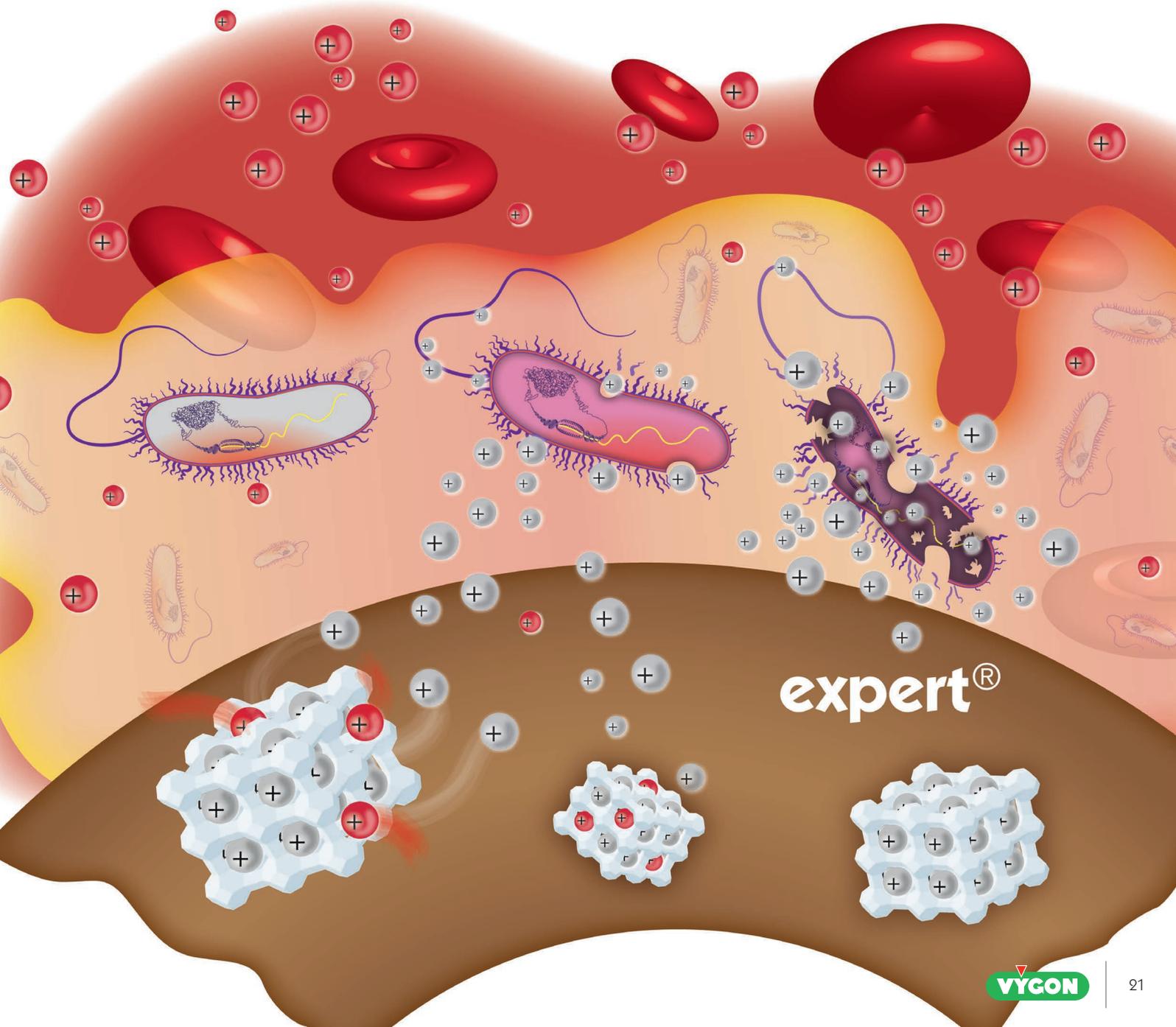

Standardisierte und hygienische Katheterpflege

Setinhalt:

- ▶ Haube
- ▶ 2 Gesichtsmasken
- ▶ Einschlagtuch als sterile Arbeitsfläche (75 cm x 50 cm)
- ▶ Abdecktuch (45 cm x 35 cm)
- ▶ 2 Paar Nitrilhandschuhe (Größe 7 / 8)
- ▶ 2 Klebestreifen
- ▶ Spritze (10 ml)
- ▶ Gefüllte NaCl 0,9% Spritzen (10 ml)
- ▶ **bionector**[®]
- ▶ 10 Kompressen (7,5 cm x 7,5 cm)
- ▶ Fixierhilfe Grip-Lok[®] 3 in 1
- ▶ Transparenter Dermafilm Verband (20 cm x 15 cm)



Produktbezeichnung	Art.-Nr.	V.E.
picc/midline pflegeset	96900554V	40

IV-Versorgungs-Set

Zur Pflege von venösen Kathetersystemen wie PICCs, Midlines, ZVKs, Hickman- und Broviac-Kathetern oder Port-Systemen

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 x 50 cm)
- ▶ Abdecktuch (45 x 35 cm)
- ▶ **bionector**[®] TKO
- ▶ Fixierhilfe Grip-**Lok**[®] 3 in 1
- ▶ 3M[™] Tegaderm[™] I.V.Advanced (10 x 15,5 cm)
- ▶ 10 Mullkompressen (7,5 x 7,5 cm)
- ▶ 2 Fixierstreifen
- ▶ Gefüllte 0,9%ige NaCl Spülspritze (10 ml)



Produktbezeichnung	HIMI-Nr.	PZN	Art.-Nr.	V.E.
IV-Versorgungs-Set	03.99.99.1900	18195493	V02772218	4

IV-Versorgungs-Set PLUS

Mit **octopus** mit **bionector**[®] TKO zur Selbstversorgung der Patienten ihres venösen Kathetersystems geeignet, aufgrund der langen Zuleitung von 27 cm und einer Liegedauer von bis zu 7 Tagen

Setinhalt:

- ▶ Einschlagtuch (75 x 50 cm)
- ▶ Abdecktuch (45 x 35 cm)
- ▶ **octopus** mit **bionector** TKO[®]
- ▶ Fixierhilfe Grip-**Lok**[®] 3 in 1
- ▶ 3M[™] Tegaderm[™] I.V.Advanced (10 x 15,5 cm)
- ▶ 10 Mullkompressen (7,5 x 7,5 cm)
- ▶ 2 Fixierstreifen
- ▶ Gefüllte 0,9%ige NaCl Spülspritze (10 ml)



Produktbezeichnung	HIMI-Nr.	PZN	Art.-Nr.	V.E.
IV-Versorgungs-Set PLUS	03.99.99.1900	18195518	V02772219	4

Grip-Lok® 3 in 1

Fixierhilfe mit Klettverschluss für periphere Katheter


Grip-Lok® 3 in 1 ist vielfältig einsetzbar. Die Schaumstoffvertiefung wurde so konzipiert, dass verschiedenste Katheterflügelgeometrien einfach, schnell und sicher fixiert werden können.

- ▶ Katheterfixierung ohne Naht
- ▶ Steriles Pflaster ermöglicht eine sichere Fixierung nahe der Eintrittsstelle
- ▶ Hoher Tragekomfort durch Druckentlastung an der Fixierungsstelle
- ▶ Einfaches Handling
- ▶ Leichte Entfernung des Pflasters ohne Rückstände




Katheterfixierung

- Sichere Katheterfixierung durch eine speziell entwickelte Schaumstoffkontur

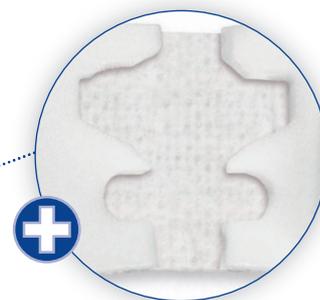


Vielfältig einsetzbar

- Die raffiniert konzipierte Schaumstoffvertiefung bietet eine sichere Fixierung von verschiedensten Katheterflügelgeometrien

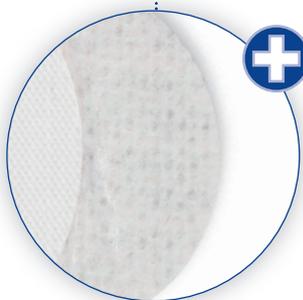

Pflastermaterial

- Hoher Tragekomfort durch flexibles Pflastermaterial mit vollständiger Auflagefläche auf der Haut

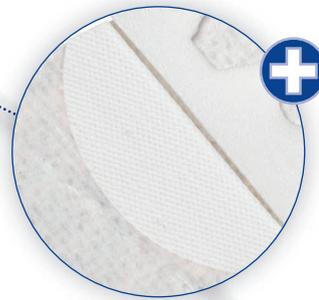

Klettverschluss

- Wiederverschließbarer Klettverschluss mit starker Haltekraft

Produktbezeichnung	Anwendungsbeispiele	Art.-Nr.	V.E.
Grip-Lok® 3 in 1	Universelle Fixierhilfe zum Fixieren	5804.09	50


Nadelfreies Konnektionssystem zur Prävention von gefäßkatheterassoziierten Infektionen

- ▶ Jederzeit geschlossenes System
- ▶ Max. 7 Tage Liegezeit oder 360 Konnektionen
- ▶ Mikrobiologisch sicher
- ▶ Einfache Desinfektion
- ▶ Gerader Flusskanal verhindert das Anhaften von Keimen
- ▶ Neutrales Spülvolumen verhindert Katheterspitzenokklusionen als Folge von Blutreflux
- ▶ Minimales Totraumvolumen
- ▶ Keine Mandrins notwendig
- ▶ Reduziert das Risiko einer Nadelstichverletzung gemäß **TRBA 250**



Technische Daten:

- ▶ Max. Gegendruck: 760 mmHg ~ 1 bar (14.5 psi)
- ▶ Hochdruckgeeignet bis max. 350 psi (24 bar)
- ▶ Durchflussrate: 105 ml/min (+/- 15%)
- ▶ Totraumvolumen: 0,03 ml
- ▶ Entsprechende Gauge-Größe: 18 G
- ▶ MRT-geeignet
- ▶ Lipidresistent
- ▶ Latexfrei

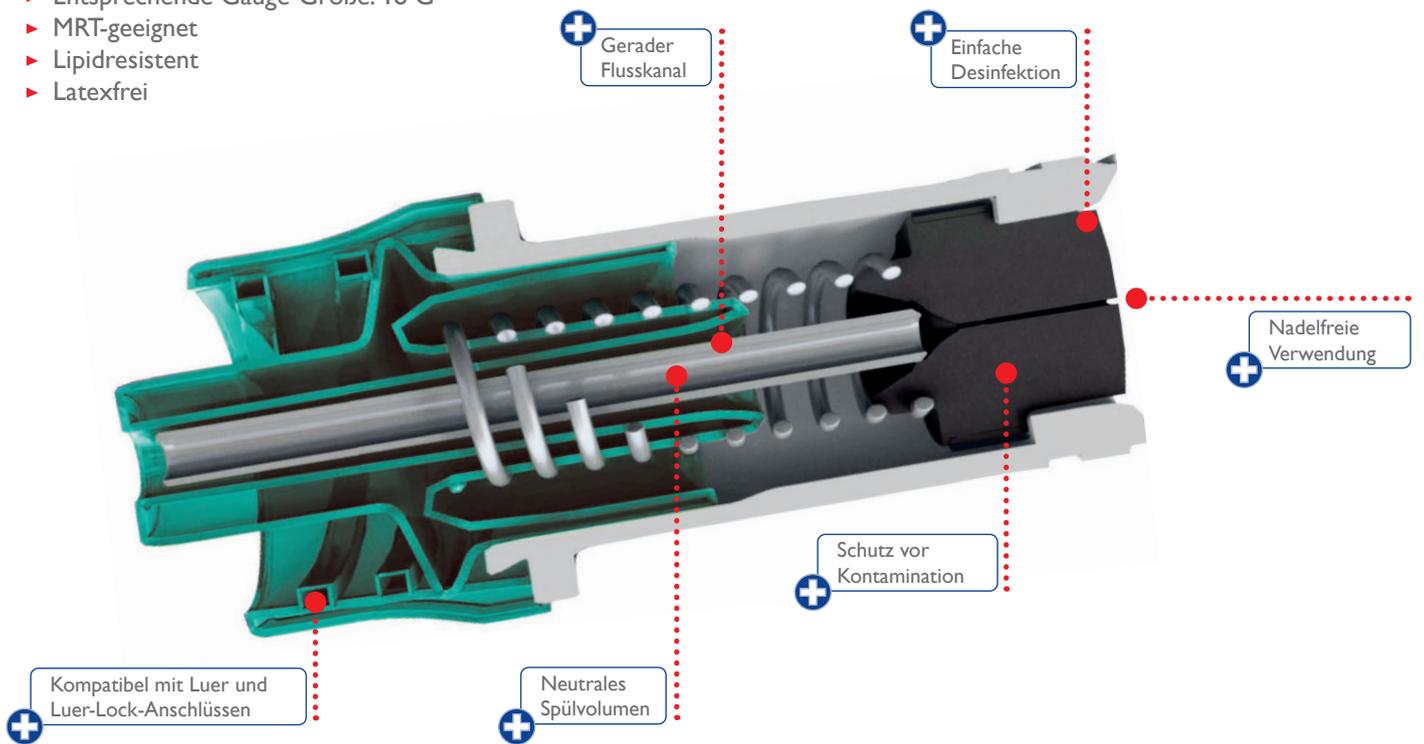

Produktbezeichnung	Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min	max. Injektionsdruck psi	Farbe	Verpackung	Art.-Nr.	V.E.
bionector® venös	0,03	105	350	grau / grün	Hartblister	896.01	50
bionector® venös	0,03	105	350	grau / grün	Weichblister	896.03	50

bionector TKO® - To Keep Open!


Nadelfreies Konnektionssystem mit einem anti-Reflux TKO-Ventil

- ▶ Bi-direktionaler Fluss – Infusion und Aspiration möglich
- ▶ Ventil schließt automatisch bei Druckabfall – Schutz vor Blutreflux
- ▶ Kein Leerlaufen des Infusionsbeutels möglich – Schutz vor Luftembolie
- ▶ Max. 7 Tage Liegezeit oder 360 Konnektionen
- ▶ Neutrales Spülvolumen
- ▶ Für die Schwerkraftinfusion geeignet
- ▶ Keine Mandrins notwendig
- ▶ Reduziert das Risiko einer Nadelstichverletzung gemäß **TRBA 250**



Technische Daten:


- ▶ Druck bzw. Sog zum Öffnen des TKO-Ventils:
 - Öffnungs-Druck: 0,43 psi (22,4 mmHg)
 - Aspirations-Sog: 7,0 psi (362 mmHg -29-facher Gefäßdruck)
- ▶ Hochdruckgeeignet bis max. 350 psi (24 bar)
- ▶ Max. Flussrate 55 ml/min
- ▶ Totraumvolumen: 0,1 ml
- ▶ MRT-geeignet
- ▶ Lipidresistent
- ▶ Latexfrei

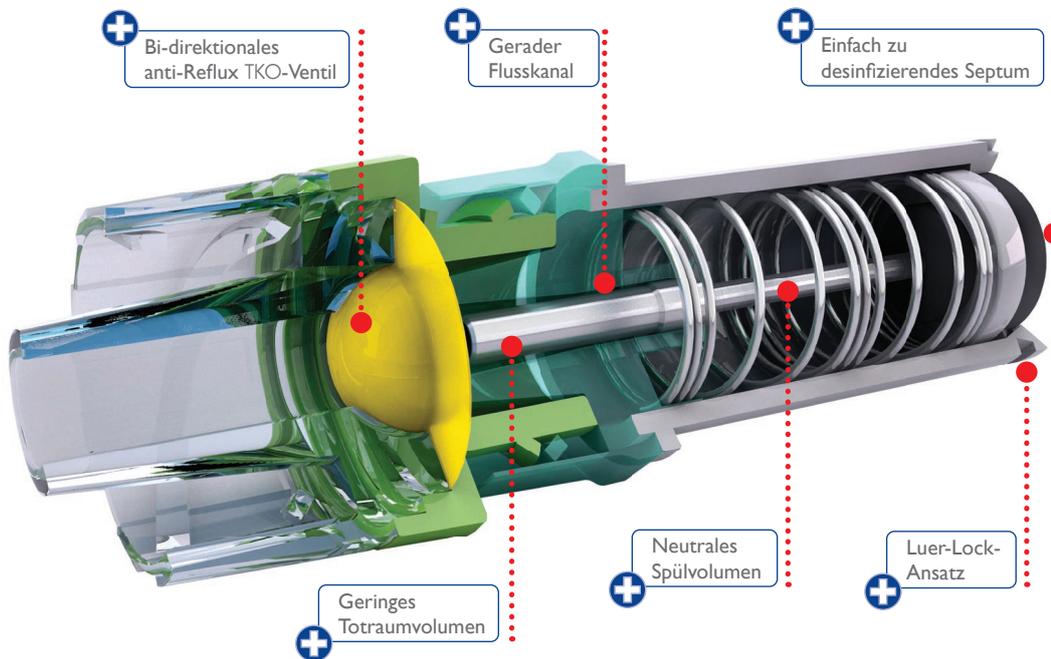

Produktbezeichnung	Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min	max. Injektionsdruck psi	HIMI-Nr.	PZN	Art.-Nr.	V.E.
bionector TKO®	0,1	55	350	03.99.99.0010	12872202	838.01	50

octopus® mit bionector TKO®

Die **octopus**®-Zuleitung entfernt die Manipulationsstelle von der Kathetereintrittsstelle und bietet gleichzeitig alle Vorteile des fest konnektierten, nadelfreien Konnektionssystems **bionector TKO**®

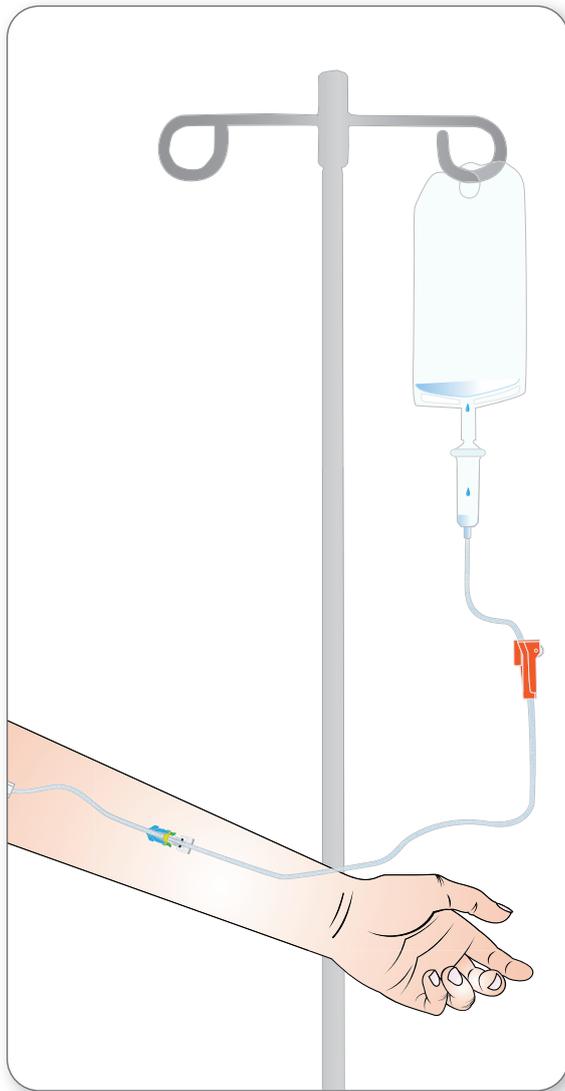

- ▶ Verringert das Risiko einer mechanischen Phlebitis
- ▶ Durch das anti-Reflux Ventil im **bionector TKO**® wird neben dem Leerlaufen der Infusionsleitung auch der Blutrückfluss in das Infusionssystem verhindert
- ▶ Jederzeit geschlossenes System durch den nadelfreien Konnektor **bionector TKO**®
- ▶ Neutrales Spülvolumen
- ▶ Bietet einen KRINKO-konformen Ersatz zum Mandrin
- ▶ Nadelfreie Verwendung reduziert das Risiko einer Nadelstichverletzung gemäß **TRBA 250**
- ▶ Optimierte Zuleitungslänge für Homecare-Patienten mit Port-, Midline- oder PICC-Katheter
- ▶ Keine Verschlusskappen erforderlich
- ▶ Zuleitung aus Polyurethan (PUR)
- ▶ PVC- und DEHP-frei
- ▶ Lipidresistent



Produktbezeichnung	Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min	Länge cm	max. Injektionsdruck psi	HIMI-Nr.	PZN	Art.-Nr.	V.E.
octopus® 1-lumig mit bionector TKO®	0,75	40	27	240	03.99.99.1011	15328462	5222.838	25


3M™ Curoso™ Desinfektionskappe für nadelfreie Konnektionssysteme

Desinfektionskappen zur Infektionsprävention für die nadelfreien Konnektionssysteme **bionector®** und **bionector TKO®** von Vygon

- ▶ Schutz vor intraluminaler Keimbesiedelung von Gefäßzugängen
- ▶ Desinfektionskappe mit 70 % Isopropanol (IPA)
- ▶ Desinfektion innerhalb von 60 Sekunden
- ▶ Liegezeit max. 7 Tage
- ▶ Sichere Luer-lock Verbindung zur Konnektion an **bionector®** und **bionector TKO®**
- ▶ Einfaches Handling durch leichtes Aufschrauben auf das nadelfreie Konnektionssystem
- ▶ Hygienische und zeitsparende Handhabung direkt am Patienten dank Desinfektionskappen auf Folienstreifen
- ▶ Optimale Sichtbarkeit der Desinfektionskappe durch neongrüne Signalfarbe
- ▶ Zu 10 Stück auf Folienstreifen oder einzeln steril verpackt

Anwendung:

- ▶ Verwendung nur für nadelfreie Konnektoren
- ▶ Nur für den Einmalgebrauch – keine Wiederverwendung möglich
- ▶ Nicht bei weiblichen, offenen Luer-Lock Anschlüssen verwenden

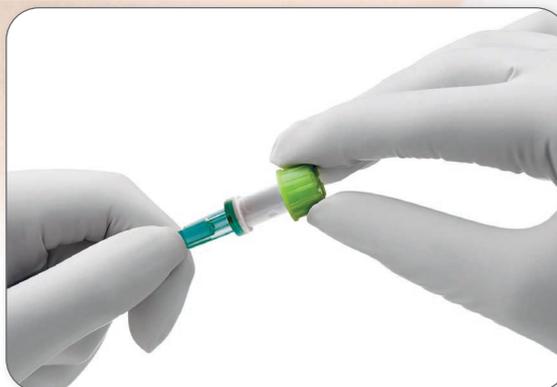

Produktbezeichnung	Ausführung	PZN	Art.-Nr.	V.E.
3M™ Curoso™	Einzeln steril verpackt	14322670	VIMCFF1-270R	2700
3M™ Curoso™	10 Stück auf Folienstreifen	14322687	VIMCFF10-250R	2500

Hersteller: **3M**





VYGON – Partner des PICC-Netzwerkes

Seit 2018 arbeiten wir im PICC-Netzwerk intensiv an dem Thema „Einsatz von peripheren Venenkathetern zur Verbesserung der Patientenversorgung in der Infusionstherapie.“ Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, neue Therapiemöglichkeiten in der Infusions-

therapie zu etablieren, um so die Versorgungsqualität in Deutschland zu erhöhen. Um dies zu erreichen stehen wir Ihnen beim Thema periphere Venenkatheter in folgenden Bereichen sehr gerne zur Verfügung:



Beratung

Im Netzwerk stehen wir Ihnen als Experten zu den verschiedenen Kathetersystemen zur Seite und helfen Ihnen bei der Auswahl der passenden Katheter.



Schulung

Von der Platzierung bis hin zur Pflege bieten wir als Netzwerk-Partner Schulungen für Ärzte und Pflegepersonal an, um Komplikationen zu reduzieren.



Versorgung

Im PICC-Netzwerk sind wir spezialisiert auf die Versorgung von Kliniken und Homecare-Dienstleistern mit innovativen Medizinprodukten.

Auf unserer Homepage www.picc-netzwerk.de finden Sie weitere Informationen zu **PICC-** und **Midline Kathetern**.

Der Podcast zu neuen Perspektiven im Vascular Access Management



Wenn Sie an neuen Perspektiven im Vascular Access Management interessiert sind, laden wir Sie herzlich ein, den Podcast "I.V. 360 Grad" zu entdecken. In diesem Podcast sprechen wir mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachkräften, Homecare-Dienstleistern, Patientinnen und Patienten sowie vielen weiteren Stimmen über spannende Themen rund um das IV-Management.

Tauchen Sie ein in die Welt der intravenösen Therapie und erfahren Sie aus erster Hand, wie Experten und Betroffene Herausforderungen angehen, bewährte Verfahren teilen und innovative Ansätze diskutieren.

Wo kann ich den Podcast hören?



QR-Code:

www.picc-netzwerk.de/podcast-iv-360

Oder über eine der folgenden Podcast-Apps:



Dort als Suchbegriff "I.V. 360 Grad" eingeben. Sobald Sie den Podcast gefunden haben, können Sie ihn abonnieren, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: info-de@vygon.com

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinesfalls vertraglichen Charakter.

VYGON GMBH & CO. KG
PRAGER RING 100 – 52070 AACHEN – DEUTSCHLAND
TEL.: +49 (0)241 9130 0 – FAX: +49 (0)241 9130 106

www.vygon.de

7G99728000-PK-Vaskuläre-Zugänge-PICC-Katheter-20220222 / Stand 2023-07

